



**GALIT**

Стоматологічна установка

**GALLANT CONSOLE**

**GALLANT CONSOLE** – ще більше простору для комфортної взаємодії лікаря, асистента та пацієнта.



Вже більше 20 років вектор у GALIT залишається незмінним — постачати найкраще стоматологічне обладнання та інноваційні рішення професіоналам у всьому світі.

Конструктори GALIT у співпраці з кращими лікарями-практиками в галузі стоматології розробляють універсальні, багатогранні рішення саме для Вашого стоматологічного кабінету.

ЦІННОСТІ, ЯКИМИ КОМАНДА GALIT КЕРУЄТЬСЯ У СВОЇЙ РОБОТІ:

- Якість – ми працюємо за найвищими стандартами якості у всьому, що виробляємо. Ми діємо у відповідності до міжнародних стандартів управління якістю ISO 13485.
- Довіра – повага, сумлінність та щирість керують нашими діями, щоб робити правильно.
- Турбота – наші люди та клієнти надихають нас діяти віддано та пристрасно.
- Інновації – ми застосовуємо останні технології для досягнення майстерності в стоматології.
- Партнерство – ми співпрацюємо зі стоматологами-професіоналами та нашими партнерами, щоб перемагати разом.
- Відданість – ми працюємо скрупульозно для забезпечення виняткових результатів з найкращим обслуговуванням клієнтів.

GALIT сьогодні символізує високу експертність рішень, щоб обладнати вашу клініку від А до Я. Ми дбаємо про довговічність наших рішень, оскільки цінуємо довговічність стосунків з нашими клієнтами.

**GALIT - Experts in dentistry**



## GALLANT CONSOLE ДЛЯ ЛІКАРІВ, ЯКІ ЦІНЮТЬ СВОБОДУ РУХІВ У СВОЇЙ ЩОДЕННІЙ ПРАКТИЦІ

### Переваги стоматологічної установки GALLANT CONSOLE:

- Кріплення крісла до гідроблоку в разі покращує ергономіку як для стоматолога, так і для асистента.
- Додатковий вільний простір під кріслом забезпечує легку взаємодію лікаря та пацієнта під час різного роду лікувальних процедур.
- Масивна, стабільна конструкція для кріплення додаткового обладнання: Ви з легкістю зможете розмістити мікроскоп, рентген, монітор для ефективної роботи.
- Комплектуючі провідних європейських виробників з гарантійним обслуговуванням.
- Довгі важелі світильника для зручності у проведенні лікувальних процедур.
- Легкий поворот плювальниці на 180° забезпечує ергономічний та зручний доступ асистента та оптимальний комфорт для пацієнта.
- Легкий доступ до аспіраційних шлангів та інших основних інструментів.
- Зручне крісло для комфорту пацієнтів будь-якого віку та ваги.



Стоматологічна установка **GALLANT**  
**CONSOLE** спроектована для максимально  
зручної роботи персоналу та ефективного  
лікування пацієнтів

# КРИСЛО TECHNODENT

## Базова версія крісла пацієнта включає:

- лівий поворотний, знімний підлокітник;
- правий поворотний, знімний підлокітник;
- функція Тренделенбург (синхронне піднімання ніг на 15° при опусканні спинки крісла на 90°);
- додаткові три програми для крісла;
- кріплення до гідроблоку (спеціальна версія моделі Sting);
- заміна обшивки крісла на Soft Foam;
- спеціальний килимок для захисту сидіння від пошкодження.



Обшивка, виготовлена з гнучкого поліуретану, покрита штучною шкірою є повністю безшовною для легкого очищення та дезінфекції.

Також доступною для замовлення є обшивка крісла пацієнта Soft Foam.



Обшивка Soft Foam



Крісло пацієнта може бути оснащене лівим або/та правим підлокітником. Для комфортнішого доступу пацієнта до крісла пацієнта.



Функція Тренделенбург (можливість синхронного піднімання ніг на 15° при опусканні спинки крісла на 90°). При такому позиціонуванні крісла пацієнта забезпечується правильний кровообіг під час лікування.



Джойстик керування кріслом пацієнта. Високоточний джойстик забезпечує керування кріслом у простий та ефективний спосіб без використання рук.



Elle Bianco



Elle E C95 Bianco



Elle E C2002 Bianco



Light Bianco



Uni Bianco

Широкий асортимент кольорів штучної шкіри є результатом ретельного аналізу потреб наших найвибагливіших замовників.

1007 Графітово-чорний	5011 Сталево-синій	14966 Сосново-зелений	8017 Шоколадний
7021 Темно-сірий сатиновий	5003 Сапфірно-синій	5515 Жовто-зелений	8017 UM33 Махагон коричневий
7502 Базальтово-сірий	1009 D Ультрамаріново-синій	68001 Зелений оливковий	14766 Винно-червоний
21366 Платинум	5023 Віддалено синій	5503 Шафраново-жовтий	4003 Бордово-фіолетовий
15141 Синьо-сірий	3491 Голубий	7791 Лососево-помаранчевий	5510 Транспортний-пурпурний
1011 Транспортний сірий А	3493 Бірюзово-синій	5017 Полунично-червоний	3492 Червоний бузок
3494 Сірий шовк	5511 Патіново-зелений	1414 Рубіново-червоний	6001 Сіро-бежевий



Ергономічний дизайн крісла ідеально повторює контури тіла пацієнта у різних положеннях

## Ще більше свободи рухів. Ще більше комфорту.


### Блок лікаря Вашої Gallant Console

Кріплення інструментів верхньої подачі блоку лікаря продумане до найменших деталей: лікар не робить лишніх рухів для фіксації інструментів.

Оптимальна вага інструментів, гнучкість шлангів і м'якість пружин забезпечують комфортну експлуатацію під час всього процесу лікування, а також зменшують навантаження на зап'ястя лікаря, мінімізують втому впродовж тривалого лікування.

Блок лікаря з верхньою подачею інструментів включає:

- індивідуально підібрані 5 інструментів;
- пневмогальмо для фіксації у потрібному місці;
- пульт керування із зрозумілим інтерфейсом для керування інструментами і кріслом пацієнта;
- підігрів і регулювання кількості води.

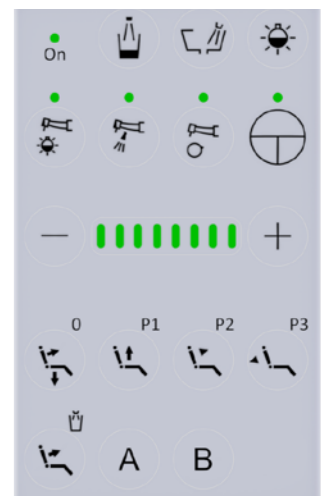



## Ефективна взаємодія в команді з Gallant Console

### Блок асистента Вашої Gallant Console:

- Забезпечує розміщення 4 інструментів і незалежну роботу слино і пило відсмоктувач;
- Горизонтальне переміщення блоку асистента дозволяє розмістити інструменти у зручному положенні.



4 інструменти



## Gallant Console



Блок асистента  
на 4 інструменти

Керамічна чаша плювальниці  
поворотного типу зі зливом  
та електронним керуванням  
наповнення склянки

Стоматологічний  
світильник МАІА

Гідроблок

Блок лікаря з верхньою  
подачею шлангів на пантографічному  
важелі з пневмогальмом, включає:

- пульт керування кріслом та установкою  
з регулюванням потужності всіх дина-  
мічних інструментів та функцією ENDO;
- максимально на п'ять інструментів.

## Опції

<b>ГІДРАВЛІЧНИЙ БЛОК:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Стационарний гідроблок з консольно закріпленим кріслом на спеціальному підйомному механізмі</li> <li>• Керамічна чаша плювальниці зі зливом та електронним керуванням наповнення склянки</li> <li>• Система чистої води 2 л</li> <li>• Вертикальна кругла стійка для кріплення блоку лікаря на короткому горизонтальному важелі та світильника з прямим важелем</li> <li>• Блок лікаря нової конструкції на пантографічному ричагу з пневмогальмом, який включає пульт управління кріслом та установкою з регулюванням потужності всіх динамічних інструментів та функцією ENDO для електромотора</li> <li>• Блок асистента з пультом, слиновідсмоктувачем та пиловідсмоктувачем</li> </ul>
<b>БЛОК ЛІКАРЯ</b> нової конструкції з верхньою або нижньою подачею шлангів, на 5 інструментів, включає:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Електронне регулювання подачі спрею</li> <li>• Поворотний важіль із пневмогальмом</li> <li>• Пульт керування кріслом та регулюванням потужності всіх динамічних інструментів</li> </ul>
<b>КРІСЛО ПАЦІЄНТА STING</b> спеціальна версія (Tecnodont, Італія), включає:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Повністю електромеханічний підйом і рухи спинки</li> <li>• Програма для перевстановлення на «0» позицію</li> <li>• Програма для позиції спльовування</li> <li>• Ножний пульт керування на основі крісла</li> <li>• Аварійна зупинка на основі</li> <li>• Аварійна зупинка на спинці</li> <li>• Здвоєний підголівник UNI</li> <li>• Широка спинка крісла</li> </ul>
<b>ДЛЯ БЛОКУ ЛІКАРЯ:</b>
Пневмовихід без підсвітки
Пневмовихід з підсвіткою
Мікромотор MX2 OPTIMA int (40 програм) Bien Air
Другий мікромотор MX2 OPTIMA int (40 програм) Bien Air
Мікромотор MX2 LED Bien Air
Другий мікромотор MX2 LED Bien Air
Мікромотор MCX LED (1000-40000 об/хв) Bien Air
Другий мікромотор MCX LED (1000-40000 об/хв) Bien Air
П'єзоелектричний скелер Xinetec Satelec
П'єзоелектричний скелер Newtron F5235 LED
Фотополімеризаційна лампа MiniLED Satelec
Пістолет 3-х функційний DCI
Пістолет 3-х функційний MINIMATE Luzzani Dental
Діатермокоагулятор
Підготовка для встановлення мікромотора (без шлангу мікромотора)
Підготовка під скелер
Пневматична педаль

Багатофункційна педаль, FARO
Багатофункційна безпровідна педаль
Нагрівач води для інструментів блоку лікаря
Столик великий із силіконовим ковриком для верхньої/нижньої подачі шлангів
<b>ДЛЯ ГІДРОБЛОКУ:</b>
3-х функційний пістолет DCI
3-х функційний пістолет MINIMATE
Фотополімеризаційна лампа MiniLED Satelec
Блок асистента з пультами, слиновідсмоктувачем та пиловідсмоктувачем
Блок асистента з додатковим плечем
Діатермокоагулятор
Сталева плита на підлогу для кріплення установки та крісла
Поворотний важіль кріплення моніторів (без кабелів моніторів)
Серветниця
Нагрівач води для наповнювача склянки плювальниці
Світильник FARO MAIA LED
Світильник FARO EVA LED
Сепаратор CATTANI
Сепаратор CATTANI з клапаном вибору DÜRR DENTAL
Сепаратор центробіжний CS1 (включає клапан вибору DÜRR DENTAL)
Клапан плювальниці DÜRR DENTAL
<b>ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЧНОГО КРІСЛА:</b>
Заміна крісла STING на крісло моделі 2009NEW
Лівий підлокітник
Правий підлокітник
Магнітна подушка для плоского підголівника
Додаткові три програми
ФУНКЦІЯ ТРЕНДЕЛЕНБУРГ (СИНХРОННЕ ПІДНИМАННЯ НІГ НА 15° ПРИ ОПУСКАННІ СПИНКИ КРІСЛА НА 90°)
Обшивка крісла Soft foam
Спеціальний килимок для захисту сидіння від пошкоджень
<b>ДЛЯ БЕЗПЕКИ І КОМФОРТУ:</b>
Центральний клапан вимкнення повітря (забезпечує закриття мережі подачі повітря при вимкненні живлення установки)
Центральний клапан вимкнення води (забезпечує закриття мережі подачі води при вимкненні живлення установки)
Сепаратор соди GF1 для CS1 Dürr Dental (забезпечує збирання соди після процедури гігієни і запобігає відкладанню соди в трубопроводах)
Пристрій для промивки Vario Dürr Dental (забезпечує періодичну подачу води в сепаратор для запобігання забруднення)



## Світильники

MAIA LED



EVA LED



Спеціальна тривимірна система обертання

Температура світла	5000 К	5000 К
Сила світлового потоку	від 3000 до 35 000 LUX	від 3,000 до 50 000 LUX
Безтіньовий ефект	9*6 мм еліпс	10*6 мм еліпс

Стоматологічні світильники FARO – це:

- оптимально освітлена робоча поверхня;
- запатентована оптична система FARO;
- знімні ручки для стерилізації;
- нове електронне оснащення світильників FARO, яке забезпечує сумісність з системами запису відео та діагностичними інструментами.

## Педалі для керування інструментами:



Багатофункційна педаль:

- увімкнення/вимкнення стоматологічних інструментів;
- увімкнення/вимкнення спрею та продувки для стоматологічних інструментів;
- регулювання швидкості/потужності стоматологічних інструментів.



Безпроводна багатофункційна педаль:

- увімкнення/вимкнення стоматологічних інструментів;
- увімкнення/вимкнення спрею та продувки для стоматологічних інструментів;
- регулювання швидкості/потужності стоматологічних інструментів.
- легко переміщувати в будь-яку позицію.

# **GALIT**

ПП «Галіт»  
вул. 15 Квітня, 6Є, с.Байківці,  
Тернопільський р-н, 47711, Україна

0 800 502 998

[office@galit.te.ua](mailto:office@galit.te.ua)  
[service@galit.te.ua](mailto:service@galit.te.ua)

