

Vacuclave® 550

Наближається щось ГРАНДІОЗНЕ: Великий малий автоклав



Дбайливий до довкілля.
Чудовий для Вас.

Більше простору. Більше переваг. Більше WOW

Для великих робіт. З невеликими зусиллями.

MELAG показує, що означає винаходити стерилізацію знову і знову: завдяки надзвичайно великій камері та інноваціям ви будете готові до всіх завдань із Vacuclave®550. Відкрийте для себе переваги нашого нового 50-літрового автоклава для енергоефективної стерилізації ваших інструментів, яка заощаджує час і кошти:

Опції. Необмежені!

Ваші інструменти заслуговують на велич: новий дизайн камери XL, час запису циклу та висока завантажувальна здатність пропонують максимальну універсальність - і ще більше місця для інструментів до 25 кг і 16 лотків.

Любить ваші інструменти і довкілля.

Екологічність завдяки інноваціям: дякуючи запатентованій технології heatRecovery, DRYtelligence® і водозберігаючій технології CoolifyTechnology, Vacuclave®550 є найкращим рішенням - для вашого бюджету та навколишнього середовища.

І найкраще: ви економите гроші.

Пропонує більше, вимагає менше: Vacuclave®550 не тільки значно дешевше придбати, ніж два альтернативних невеликих автоклава, але він також зменшує поточні експлуатаційні витрати на технічне обслуговування та валідацію.



Велика камера. Величезні переваги.

Відкриває нові можливості:

Більше інструментів. За більш короткий час.

Перетворіть 2 в 1 - У порівнянні з двома альтернативними невеликими автоклавами, Vacuclave®550 забезпечує значно більшу місткість при на 40% меншій площі. Відкрийте для себе переваги наших продуктів для стерилізації максимальної кількості інструментів у мінімальній кількості простору за рекордно короткий термін :



Вражаюча швидкість

Рекордний час роботи всього 12 хвилин (без сушіння) і найвища якість насиченої пари – ось що означає технологія Double Jacket (подвійний кожух). Патент MELAG з 2012 року.



Безкомпромісний комфорт

Однозначно розумніший! Завдяки надзвичайно великому сенсорному дисплею Smart-Touch керування таке ж легке, як і користування смартфоном.



Розумна сушка

DRYtelligence®забезпечує ідеальні результати сушіння, скорочуючи час висихання до 80%.



Документація відстежування

До побачення, журнали стерилізації! ProControl дозволяє вам документувати схвалення партії безпосередньо через Smart-Touch Display без будь-якого додаткового програмного забезпечення.




Виняткова місткість

Більше місця для інструментів довжиною до 46 см: стерилізуйте вантаж вагою до 25 кг на 16 лотках або до 10 MELAstore®B.



Повна гнучкість:

Ми пропонуємо 3 варіанти завантаження, щоб кожна практика чи клініка могла організувати робочий процес у найбільш зручний для них спосіб. З нашою додатковою системою ковзання ми гарантуємо найвищий рівень ергономіки, безпеки та комфорту під час завантаження та розвантаження.

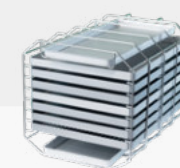

База для кріплення Mount Basic до 16 лотків

для стерилізації максимальної кількості розгорнутих і загорнутих інструментів



Завантажувальний пристрій до 10 коробок MELAstore®

для зручного завантаження та розвантаження автоклава зі стерилізаційними контейнерами



Завантажувальний пристрій Loading slide with Mount Comfort до 16 лотків

для максимальної місткості та ергономіки під час обробки окремих інструментів

Екологічне рішення:

Зберігає планету. І понад 10 000 €.

Vacuclave®550 доводить справжню велич: новий 50-літровий автоклав поєднує захист навколишнього середовища та економію. З нашими інноваціями, орієнтованими на майбутнє, заощаджуйте електроенергію, воду а, отже, багато коштів:




Відновлення

Запатентована система регенерації тепла використовує тепло від використаної пари для отримання нової пари. Технологія відновлення не тільки зменшує споживання енергії на 15 % за цикл, але й розсіювання тепла в кімнату обеззаражування.

Розумне сушіння DRYtelligence®

Покладайтеся на ідеальні результати: DRYtelligence® оптимально адаптує процес сушіння до вашого завантаження. Інтелектуальний алгоритм скорочує час сушіння до 80 % – і таким чином економить багато часу, грошей та енергії.

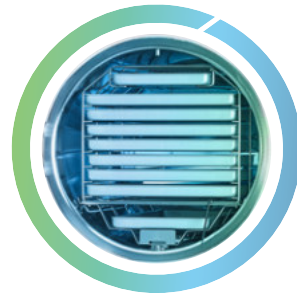


Охолодження

100% надійність з 0% охолоджуючої води – запатентована технологія Coolify поєднує високоефективне повітряне охолодження з розумним моніторингом температури. Це дозволяє вам насолоджуватися автоклавом і навколишнім середовищем протягом тривалого часу!

Енергозбереження

Vacuclave®550 переконує своєю високою енергоефективністю під час стерилізації та в режимі очікування! Power Safe переводить нагрівання та дисплей в енергозберігаючий режим між циклами стерилізації.

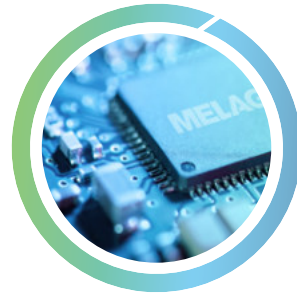

 **-2,200 €**


Більше потужності, менше енергії!

Чотири представлені тут технології дозволяють потужному Vacuclave®550 заощадити енергію на суму близько 2200 євро.

 **-2,600 €**


Економія води також означає: економія грошей!

Чотири представлені тут технології дозволяють потужному Vacuclave®550 заощадити енергію на суму близько 2200 євро.

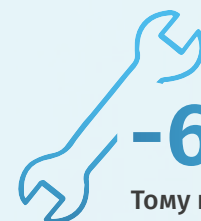 **-6,100 €**

Тому що менше пристроїв призводять до зниження витрат!

Концепція зручного для обслуговування пристрою вдвічі зменшує витрати на технічне обслуговування та перевірку.*

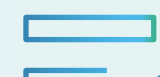 **-10,900 €***

Є понад 10 000 вагомих причин для вибору Vacuclave® 550.

Організуйте демонстрацію продажів у реальному часі особисто або онлайн, щоб у довгостроковій перспективі знизити свої операційні витрати!

* Після приблизно 14 років (з 5 циклами на день) порівняно з двома звичайними невеликими автоклавами без представлених технологій

Для вашої безпеки: Все з одного джерела.

Системне рішення MELAG.

Ваша стерилізаційна кімната – місце, де ви гарантуєте безпеку пацієнтів!

Наші мийні машини-дезінфектори, пакувальні машини, автоклави та програмні рішення перетворюють ваші мрії про оптимізовані робочі процеси в реальність. Ідеальна взаємодія системних рішень MELAG дозволяє досягти більшої економії часу та коштів на повторну обробку інструментів

- 

Персонал:
Один центральний контакт, щоб відповісти на всі ваші запитання щодо обробки інструментів.
- 

Ефективність:
Оптимізація витрат шляхом синхронізації обслуговування всіх пристроїв у вашій кімнаті обеззаражування.
- 

Оптимізовано для процесу:
Скоординована робоча концепція, щоб уникнути збоїв у повсякденній практиці.



Vacuclave® 550 –Унікальний як продукт, неперевершений у системі:



✓ Очищення та дезінфекція з **MELAtherm®**



✓ Пакування з **MELAseal® or MELAstore®**



✓ Стерилізація паром з **Vacuclave® 550**



✓ Документація та погодження з **MELAttrace®**



✓ Маркування з **MELAprint® 60**

Аксессуары для Vacuclave® 550

Настільки ж універсальні, як і ваші потреби.

Різноманітні аксесуари дозволяють зібрати конфігурацію, яка найкраще відповідає вашим потребам.

Ідеально пристосований до вашого робочого процесу, Vacuclave®550 максимально підвищує безпеку та ефективність у боротьбі з інфекціями!




Завантаження

Для найкращого використання стерилізаційної камери ми пропонуємо ідеальні системи завантаження для всіх сценаріїв застосування.

Mount Basic до 16 лотків

- ✓ для 7 лотків для Vacuclave® 550 і 2 довгих лотків
- ✓ для 14 коротких і 2 довгих лотків

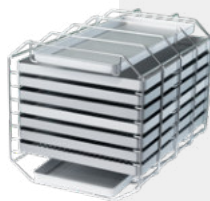

Loading slide до 10 MELAstore® Boxes

- ✓ для 10x MELAstore® Box 100
- ✓ для 7x MELAstore® Box 200 та 1x MELAstore® Box 100



Loading Slide з Mount Comfort до 16 лотків

- ✓ для 7 лотків для Vacuclave® 550 і 2 довгих лотків
- ✓ для 14 коротких і 2 довгих лотків



Документація

Vacuclave®550 гарантує юридично відповідну документацію та схвалення завдяки інтегрованим USB та мережевим інтерфейсам.

MELAtrace®

забезпечує професійну документацію, затвердження та відстеження всієї процедури обробки без щорічної ліцензії та плати за підпис.



MELAprint® 60

друкує етикетки зі штрих-кодом для оптимального маркування інструментів і відстеження.



USB Stick

швидко та легко документує всі журнали стерилізації Vacuclave®550 на цифровому пристрої зберігання даних.



Очищення води

Системи очищення води MELAdem® забезпечують високоякісну демінералізовану воду для захисту як вашого автоклава, так і інструментів.

MELAdem® 47

є потужною системою зворотного осмосу для забезпечення Vacuclave®550 демінералізованою водою.



MELAdem® 53

це система очищення води з дуже високою потужністю для Vacuclave®550, MELAtherm® і ще до двох інших пристроїв.



MELAjet®

дозволяє обприскувати інструменти демінералізованою водою



Подальші аксесуари

Наші додаткові аксесуари забезпечують безпечну стерилізацію, яка економить час, а також оптимальний догляд за вашим автоклавом.

Chamber Protect

для ретельного очищення поверхонь з нержавіючої сталі. Набір для очищення камери містить потужний очищувач, 50 ганчірок без ворсу та 1 тканину з мікрофібри.



MELAcontrol® Helix

250 індикаторних смужок забезпечують надійний підтвердження результатів стерилізації.



MELAstore®

гарантує процес пакування з величезною економією часу завдяки стандартизації, а також зниженням матеріальних витрат і відходів практики.



Більша місткість?

Наш Cliniclave® 45 забезпечує максимальну гнучкість завдяки місткості одного або двох стерилізаційних блоків (StU), а також версії пристрою з однією або двома дверцятами.

Технічні Характеристики

Vacuclave® 550 гарантує швидку стерилізацію великої кількості інструментів з широким набором програм:

Програми		Час роботи (від мінімального до максимального навантаження) *	Сушіння	
			DRYtelligence® **	Контрольоване за часом
Universal-B	134 °C, Час витримки: 5,5 хв	13 – 43 хв	> 4 хв	13 хв
Quick-S	134 °C, Час витримки: 3,5 хв	12 – 33 хв	> 4 хв	13 хв
Gentle-B	121 °C, Час витримки: 20,5 хв	25 – 62 хв	> 4 хв	13 хв
Prion-B	134 °C, Час витримки: 20,5 хв	28 – 58 хв	> 4 min	13 хв

* Час роботи в 13 амп може бути збільшений до 10 хвилин

** DRYtelligence® автоматично адаптує процес сушіння до вашого завантаження. Завдяки розумному сушінню завжди досягаються оптимальні результати сушіння.

Vacuclave® 550 можна швидко та легко встановити як настільний автоклав у будь-якій дезактиваційній кімнаті. Нижче наведено список вимог до встановлення:

	Робота 15 амп	Робота 13 амп
Артикул	ME10550	
Розмір камери	Ø 38 см x 45 см довжина	
Об'єм камери	53 літрів	
Кількість завантаження	25 кг без упаковки, 11 кг упаковка, 17.5 кг з MELAstore®, 3.5 кг текстилю	17,5 кг без упаковки, 9 кг упаковка, 14 кг з MELAstore®, 2 кг текстилю
Розміри приладу (Д x В x Ш)	63,6 x 59,0 x 71,5 см висота вкл. дисплей 65 см прилад підходить для стільниці 60 см	
Вага	98 кг (робоча вага до 127 кг)	
Джерело живлення	220 – 230 В / 50 – 60 Гц	
Споживання енергії	3.400 Ват	2.700 Ват
Інтерфейси документації	USB, Мережа	

ПП «Галіт»

вул. 15 Квітня, 6Є, м. Тернопіль,
47711, Україна

0 800 502 998 office@galit.te.ua service@galit.te.ua

GALIT
Стоматологічне обладнання



Збережіть папір, захистіть навколишнє середовище:

Щоб зменшити кількість паперу, ми надаємо вам електронну документацію користувача через наш Центр Завантажень

Додаткова інформація за адресою: www.melag.com

MELAG
competence in hygiene