

Elmasonic Med - це серія ефективних ультразвукових очисних пристроїв, пов'язаних з надійним попереднім очищенням медичних, стоматологічних та хірургічних інструментів та імплантатів. З ультразвуковою частотою 37 кГц можна видалити навіть найважче забруднення*

Очисні пристрої Elmasonic Med, що підходять для різних застосувань, мають об'єм баків від 3 до 90 літрів. Спеціальні хімічні засоби, розроблені компанією ELMA разом із практичними аксесуарами, такими як кошики, підставки для лотків тощо, забезпечують найкращі результати очищення.



Розроблено для	Медичні центри • Лікарні • Стоматологічні практики • Центральні відділи стерильного постачання • Стоматологічні лабораторії • Студії татуювання та пірсингу • Салони по догляду за ногами.	
Очищає	Хірургічні, медичні або стоматологічні інструменти • Протези та імплантанти • Інструменти з галузей ортопедії, татуювання та пірсингу.	
Видаляє	Залишки крові, тканин і кісток • Жири • Виділення • Очистки зубів • Зубний камінь • Базалеві відкладення • Альгінати та штукатурки • Шліфувальні та полірувальні пасти • Віск • Флюс • Цементи • Мозолі та залишки шкіри • Інші забруднення.	

Термодезінфектор MELATHERM 10 Evolution

Це високотехнологічна термодезінфекційна машина від компанії MELAG, розроблена спеціально для стерилізації та дезінфекції медичних інструментів.

Це обладнання особливо підходить для лікарень, стоматологічних клінік та інших медичних закладів, де надзвичайно важливе дотримання найвищих стандартів гігієни. Завдяки використанню тепла, миючих засобів та інтенсивного змивання, MELATHERM 10 Evolution видаляє мікроорганізми та забруднення, готуючи інструменти до подальшої стерилізації.

MELATHERM 10 Evolution

БАЗОВА ВЕРСІЯ	Прилад, розташований під столом
Зовнішні розміри (Ш x В x Г)	60 см x 82 x 68 см
Робоча камера (Ш x В x Г)	46,5 см x 40,5 x 45 см
Вага	80 кг
Живлення	3Н, змінний струм, 230В/400В / 50Гц /3x16 А /9,3 кВт
Код	20021-DTB (230В) 20020-DTA (400В)



Основні переваги та функції MELATHERM 10 Evolution:

- **Компактність і місткість:** Пристрій займає мінімум місця, легко інтегрується з наявним обладнанням, при цьому вміщує багато інструментів за цикл.
- **Ефективна дезінфекція:** Спеціальна система розпилення й контроль температури забезпечують ретельне очищення за медичними стандартами.
- **Зручне управління:** Сенсорний дисплей дозволяє легко обирати програми та контролювати процес, зменшуючи ризик помилок.
- **Енергоефективність:** Оптимізовані цикли споживають мінімум води й електроенергії, що знижує витрати та зменшує вплив на довкілля.
- **Інтеграція з системами звітності:** Пристрій автоматично документує дані, що полегшує звітність і контроль якості.

Це не просто обладнання для дезінфекції, а комплексне рішення для безпечної, ефективною та економічною обробки медичних інструментів. Висока технологічність, компактний дизайн та інтуїтивно зрозуміле управління роблять його ідеальним вибором для медичних установ, де важливо забезпечити дотримання високих стандартів гігієни. Завдяки своїм перевагам, таким як енергоефективність, велика місткість та можливість інтеграції з внутрішніми системами закладу, MELATHERM 10 Evolution оптимізує процеси очищення та дезінфекції, одночасно знижуючи витрати на ресурси.

Careclave — це компактний і простий у використанні автоклав. Він поєднує передові технології стерилізації з інтуїтивно зрозумілим управлінням, забезпечуючи надійний та ефективний процес стерилізації.

Careclave оптимізований для економії простору, швидких циклів і легкості у використанні, що робить його ідеальним рішенням для професіоналів.

Автоклави серії Careclave мають 3 програми для режиму Careclave:

- Care-Therm – зовнішнє та внутрішнє очищення/16-18 хв
- Care-S – 134°C час витримки 3,5 хв/12-23 хв
- Care-B Kombi – зовнішнє та внутрішнє очищення та дод. стерилізація 134°C час витримки 3,5 хв/33-34 хв


Та 4 програми для режиму Vacuklav:

- Universal-B – 134°C, час витримки 5,5 хв / 13-22 хв.
- Schon-B – 121°C, час витримки 20,5 хв / 27-37 хв.
- Quick-S – 134°C, час витримки 3,5 хв / 9-15 хв.
- Prions-B – 134°C, час витримки 20,5 хв / 28-37 хв.



CARECLAVE	
Розміри (Ш x В x Г)	48 x 50 x 65,3 см
Вага	69 кг
Розміри / Об'єм камери	Ø 25 x 35 см довжини / 18 л.
Об'єм завантаження камери	Макс. 11 кг інструментів / 2кг текстилю
Об'єм загрузки Carebox	Макс. 8. Інструменти з порожнистим корпусом
Живлення	220-240 В, 50 Гц, 3 кВт
Підключення стисненого повітря	4-80 бар
Подача води	Макс. 350С 1-10 бар. Потрібна додаткова обробка води
Код	10618

Cliniclave 45 — це висококласний автоклав, розроблений для великих медичних установ, таких як лікарні та клініки, де потрібен ефективний і надійний процес стерилізації. Завдяки інноваційним технологіям, цей автоклав забезпечує чіткий контроль температури та тиску, що гарантує високий рівень стерилізації.

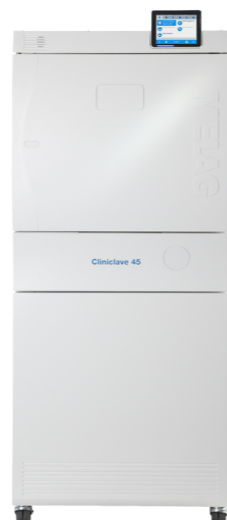

Автоклав ідеально підходить для інтенсивного використання, забезпечуючи високу продуктивність і надійність, а також різноманітні програми для обробки медичних інструментів.

Ось основні переваги:

- Висока продуктивність: Швидке оброблення великої кількості інструментів завдяки великій місткості.
- Інноваційна технологія: Система контролю температури і тиску для найвищих стандартів стерилізації.
- Легкість у використанні: Зрозумілий інтерфейс для простоти роботи.
- Надійність і довговічність: Виготовлений із високоякісних матеріалів для тривалого терміну служби.
- Безпека: Системи безпеки для автоматичного вимкнення в разі неполадок.
- Екологічність: Енергоефективні технології, що знижують вплив на довкілля.

Cliniclave 45 M — це автоклав для стерилізації великої місткості, розроблений для медичних установ, таких як клініки та лікарні, де потрібна надійність і ефективність в обробці інструментів. Завдяки своїм великим розмірам камери, він дозволяє стерилізувати великі обсяги інструментів за один цикл, що ідеально підходить для медичних закладів з високим обсягом роботи.



Основні переваги:

- Велика місткість: Простора камера для стерилізації великої кількості інструментів, ідеально для медичних закладів.
- MELA control: Забезпечує стабільні результати стерилізації для максимальної безпеки.
- Ефективна робота: Швидкі цикли стерилізації зменшують час простою і підвищують продуктивність.
- Легкість у використанні: Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для зручності персоналу та мінімального навчання.
- Енергоефективність: Оптимізує енергоспоживання при високих стандартах стерилізації.

	Cliniclave 45	Cliniclave 45 M
Розміри (Ш x В x Г)	65 x 160 x 91 см	65 x 160 x 153 см
Розміри / Об'єм камери	Глибина 72 см, Ø 44 , об'єм 105 л.	Глибина 134 см, Ø 44 , об'єм 200 л.
Об'єм завантаження камери	Макс. 35 кг інструментів / 7 кг текстилю	Макс. 70 кг інструментів / 14 кг текстилю
Вага без завантаження	255 кг	315 кг
Робоча вага	275 кг	370 кг
Напруга та частота	3x380-415 В, 50/60 Гц, 10.500 Вт, 16 А	3x380-415 В, 50/60 Гц, 13.500 Вт, 32 А

MELAG постійно вдосконалює процеси стерилізації з Vacuclave® 550, оснащеним великою 50-літровою камерою. Цей автоклав забезпечує енергоєфективну стерилізацію, економить час і гроші, та вміщує до 25 кг інструментів на 16 лотках.

Vacuclave 550

	Робота 15 amp	Робота 13 amp
Розміри (Ш x В x Г)	63,6 x 59,0 x 71,5 см	
Вага	98 кг (робоча вага до 127 кг)	
Розміри / Об'єм камери	Ø 45 x 38 см, 53 л.	
Кількість завантаження	25 кг без упаковки, 11 кг в упаковці, 15,5 кг зMELAstore, 3,5 кг текстилю	17,5 кг без упаковки, 9 кг в упаковці, 14 кг зMELAstore, 2 кг текстилю
Об'єм завантаження камери	8 кг інструментів / 2 кг текстилю.	
Потужність		
Живлення	220-230 В / 50-60 Гц / 2.700 Вт	
Код	10550	



Vacuclave® 550 гарантує швидку стерилізацію великої кількості інструментів з широким набором програм:

Програми		Час роботи (від min. до max. навантаженого) DRYtelligence® **	Сушіння	
			DRYtelligence® **	Контрольоване за часом
Universal-B	134 °C, час витримки: 5,5 хв	13 – 43 хв	> 4 хв	13 хв
Quick-S	134 °C, час витримки: 3,5 хв	12 – 33 хв	> 4 хв	13 хв
Gentle-B	121 °C, час витримки: 20,5 хв	25 – 62 хв	> 4 хв	13 хв
Prion-B	134 °C, час витримки: 20,5 хв	28 – 58 хв	> 4 хв	13 хв

* Час роботи в 13 amp може бути збільшений до 10 хвилин
 ** DRYtelligence® автоматично адаптує процес сушіння до вашого завантаження. Завдяки розумному сушінню завжди досягаються оптимальні результати сушіння.

Преміум-автоклав з системою DRYtelligence забезпечує швидку стерилізацію паром. Цей пристрій ідеально підходить для обробки упакованих інструментів за 20 хвилин за допомогою швидкої програми «В», а неупакованих — всього за 10 хвилин, включаючи фракціонований попередній вакуум і осушування.

Автоклави серії Vacuclav мають 5 програм:

- Універсальна програма 134°C / 2 бар.
- Швидка програма «В» 134°C / 2 бар.
- Швидка програма «S» 134°C / 2 бар.
- Антипріонна програма 134°C / 2 бар.
- М'яка програма 121°C / 1 бар.

2 контрольні програми:

- Вакуум-тест.
- Тест «Боуї-Дік».



Vacuclav® 40B+ Evolution

Технічні характеристики	Vacuclav 40 B+ Evolution (з підключенням)	Vacuclav 41 B+ Evolution (автономний)	Vacuclav 43 B+ Evolution (автономний)	Vacuclav 44 B+ Evolution (з підключенням)
Розмір та об'єм резервуару	25 x 35 см / 18 л		25 x 45 см / 23 л	
Об'єм завантаження	до 9 кг інструментів / до 2 кг текстилю		до 9 кг інструментів / до 2,5 кг текстилю	
Зовнішні розміри (ШxВxГ)	46 см x 50 см x 55 см Висота з дисплеєм – 56 см Ніжки автоклаву розраховані на стільницю глибиною 50 см		46 см x 50 см x 68 см Висота з дисплеєм – 56 см Ніжки автоклаву розраховані на стільницю глибиною 60 см	
Вага	55 кг	60 кг	69 кг	64 кг
Живлення	220-240В / 50-60 / 3400 Вт			
Код	10080	10081	10083	10084

Автоклави серії Vacuclav належать до класу «В» відповідно до європейського стандарту EN 13060 і працюють на основі попереднього вакууму. Спочатку з камери відкачується повітря за допомогою потужного вакууму, після чого кілька разів впускається і знову відкачується водяна пара. Це забезпечує повне видалення повітря перед початком стерилізації з камери, упакованих пористих інструментів та текстильних виробів. Для ефективного осушування, що важливо для тривалого зберігання стерилізованого матеріалу, Vacuclav створює вакуум наприкінці процедури. Датчики і сучасні мікропроцесорні засоби контролюють параметри тиску та температури для надійної стерилізації.

Vacuclav 23B+

Розміри (Ш x В x Г)	42,5 x 49 x 74 см
Вага	50 кг
Розміри / Об'єм камери	Ø 25 см x 45 см. 23 л.
Об'єм завантаження камери	8 кг інструментів / 2 кг текстилю.
Живлення	230 В / 50 Гц / 2.100 Вт
Код	10053



Автоклави MELAG Prime Line, такі як Vacuclave 318 і 323, забезпечують відмінне співвідношення ціни та якості з інноваціями для підвищення продуктивності, покращеного сушіння та повної відстежуваності.

НОВІ АВТОКЛАВИ MELAG VACUCLAVE 318 І VACUCLAVE 323:

- Стерилізація класу В:
Vacuclave 323: стерилізація до 8 кг на 5 лотках за 16-31 хвилину (плюс сушка).
Vacuclave 318: стерилізація до 7 кг на 5 лотках за 15-27 хвилин (плюс сушка).
- Сушіння DRYtelligence: оптимізований процес сушіння з скороченням часу до 80%.
- Розумний сенсорний дисплей: інтуїтивний сенсорний екран з LED підсвічуванням.
- Схвалення ProContro: автентифікація користувача та друк етикеток з штрих-кодом без додаткового програмного забезпечення.
- Підключення та реєстрація даних: збереження параметрів стерилізації через USB або мережу для відповідності вимогам.
- Автономна концепція: вбудовані резервуари для води та ефективно повітряне охолодження без охолоджувальної води.
- Енергозберігаючий режим Power Save: Нагрівання та дисплей переходять у режим очікування між стерилізаціями для максимальної енергоефективності.
- Рутинна концепція EasyCare: зручна заміна фільтрів, очищення бака та водопостачання.

Vacuclave 318

Розміри (Ш x В x Г)	47 x 50 x 64 см
Вага	48 кг
Розміри / Об'єм камери	∅ 25 см x 35 см. 17 л.
Об'єм завантаження камери	7 кг інструментів /1,8 кг текстилю
Потужність	2.100 Вт
Живлення	220 - 230 В, 50 - 60 Гц.
Код	



Vacuclave 323

Розміри (Ш x В x Г)	47 x 50 x 64 см
Вага	49 кг
Розміри / Об'єм камери	∅ 25 см x 45 см. 23 л.
Об'єм завантаження камери	8 кг інструментів /2 кг текстилю.
Потужність	2.100 Вт
Живлення	220 - 230 В, 50 - 60 Гц.
Код	



Автоклави MELAG Pro-Class отримали оновлення! Модель Pro Line має камери об'ємом 17 літрів (Vacuclave 118) та 23 літри (Vacuclave 123), забезпечуючи ефективну та ресурсозберігаючу стерилізацію.

НОВІ АВТОКЛАВИ MELAG VACUCLAVE 118 І VACUCLAVE 123:

- Потужний вакуумний процес класу В:
Vacuclave 118: стерилізація до 5 кг на 5 лотках за 15-27 хвилин (плюс просування).
Vacuclave 123: стерилізація до 6 кг на 5 лотках за 16-31 хвилину (плюс висихання).
- Розумний сенсорний дисплей: інтуїтивний сенсорний екран з LED підсвічуванням для легкого керування.
- Підключення та реєстрація даних: збереження параметрів стерилізації через USB або мережу для відповідності вимогам.
- Автономна концепція: інтегровані резервуари для води та ефективно повітряне охолодження для роботи без охолоджувальної води.
- Енергозберігаючий режим Power Save: Нагрівання та дисплей переходять у режим очікування між стерилізаціями для максимальної енергоефективності.
- Рутинна концепція EasyCare: зручні оптимізації для заміни фільтрів, очищення бака та водопостачання.

Vacuclave 118

Розміри (Ш x В x Г)	47 x 50 x 64 см
Вага	48 кг
Розміри / Об'єм камери	∅ 25 см x 35 см. 17 л.
Об'єм завантаження камери	5 кг інструментів /1,8 кг текстилю.
Потужність	2.100 Вт
Живлення	220 - 230 В, 50 - 60 Гц.
Код	10118



Vacuclave 123

Розміри (Ш x В x Г)	47 x 50 x 64 см
Вага	49 кг
Розміри / Об'єм камери	∅ 25 см x 45 см. 23 л.
Об'єм завантаження камери	6 кг інструментів /2 кг текстилю.
Потужність	2.100 Вт
Живлення	220 - 230 В, 50 - 60 Гц.
Код	10123

МЕБЛІ
МЕДИЧНІ

УСТАНОВКИ

КРІСЛА ТА
СТІЛЬЦІ

ОСВІТЛЕННЯ

КОМПРЕСОРИ І
ВІДСМОКТУЮЧІ
АГРЕГАТИ

СТЕРИЛІЗАЦІЯ

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ІНСТРУМЕНТИ

ЦИФРОВЕ
ОБЛАДНАННЯ

МІКРОСКОП

МОНІТОРИ

ГІГІЕНА ТА
ПРОФІЛАКТИКААПАРАТ
VECTORІМПЛАНТОЛОГІЯ
І ХІРУРГІЯДЛЯ
ЗУБОТЕХНІЧНИХ
ЛАБАРАТОРІЙДЛЯ
НАВЧАЛЬНИХ
ЦЕНТРІВ

ЗАПАСНІ

Автоклави Pro Line класу S є доступною альтернативою для клінік, які не потребують автоклавів класу B. Модель Vacuclave® 123 S стерилізує навіть упаковані інструменти з простими порожнистими корпусами, як-от ножиці та тримачі голки. Інтуїтивне управління через сенсорний дисплей Smart-Touch дозволяє легко користуватися пристроєм навіть у рукавичках, а вбудовані USB та мережеві інтерфейси забезпечують швидку реєстрацію даних.

Автоклави доступні з об'ємом камер 17 та 23 літри, можуть стерилізувати до 5 кг інструментів на 5 лотках за 13-25 хвилин (плюс сушка), що робить їх зручними та швидкими в роботі.



Vacuclave 118 s

Розміри (Ш x В x Г)	47 x 50 x 64 см (для поверхні шириною 60 см)
Вага	46 кг
Розміри / об'єм камери	35 см, Ø 25 см / 17 літрів
Об'єм завантаження камери	макс. 4 кг інструментів / 1 кг текстилю
Потужність	2100 Вт
Живлення	220-230 В, 50-60 Гц
Код	ME10118S

Vacuclave 123 s

Розміри (Ш x В x Г)	47 x 50 x 64 см (для поверхні шириною 60 см)
Вага	47 кг
Розміри / об'єм камери	45 см, Ø 25 см / 23 літри
Об'єм завантаження камери	макс. 5 кг інструментів / 1 кг текстилю
Потужність	2100 Вт
Живлення	220-230 В, 50-60 Гц
Код	ME10123S



NEW

Vacuclave 105 - базовий автоклав Pro Line класу B забезпечує безпечну, зручну та швидку стерилізацію.

- Потужна вакуумна обробка класу B.
- Стерилізація до 2 кг на 2 лотках за 7-15 хвилин (плюс сушіння) в камері 4,7 л — зроблено в Німеччині.
- Регульоване сушіння: налаштування тривалості залежно від типів вантажу.
- Сенсорний дисплей з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, доступний навіть у медичних рукавичках.
- Підключення та реєстрація даних: збереження результатів через USB чи мережу, або друк з MELAprint 80.
- Автономність: зовнішні контейнери для води і повітряне охолодження без охолоджувальної води.
- Режим енергозбереження Power Save: нагрівач і дисплей переходять у режим очікування між стерилізаціями.



Чемпіон за співвідношенням ціни та якості: **Vacuclave 305** Prime Line пропонує відмінні результати сушіння та розширені функції затвердження циклів.



- Інтелектуальне сушіння DRYtelligence: оптимальні результати завдяки алгоритму.
- ProControl: затвердження циклів і автентифікація користувачів на дисплеї без додаткового ПО.
- Друк етикеток зі штрих-кодом: MELAprint 80 для маркування та контролю стерилізації.

	Pro line	Prime line
	Vacuclave 105	Vacuclave 305
Розміри (Ш x В x Г)	30 x 30 x 59 см (для поверхні шириною 60 см)	
Вага	28 кг	
Розміри / Об'єм камери	8 x 2,3 x 31 см. 4,7 л.	
Об'єм завантаження камери	Max 2 кг інструментів / 0,45 кг текстилю	
Потужність	2.100 Вт	
Живлення	200-230 В / 50-60 Гц	
Код	ME 10105	ME 10305

МЕБЛІ
МЕДИЧНІ

УСТАНОВКИ

КРІСЛА ТА
СТІЛЬЦІ

ОСВІТЛЕННЯ

КОМПРЕСОРИ І
ВІДСМОКТУЮЧІ
АГРЕГАТИ

СТЕРИЛІЗАЦІЯ

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ІНСТРУМЕНТИ

ЦИФРОВЕ
ОБЛАДНАННЯ

МІКРОСКОП

МОНІТОРИ

ГІГІЕНА ТА
ПРОФІЛАКТИКААПАРАТ
VECTORІМПЛАНТОЛОГІЯ
І ХІРУРГІЯДЛЯ
ЗУБОТЕХНІЧНИХ
ЛАБАРАТОРІЙДЛЯ
НАВЧАЛЬНИХ
ЦЕНТРІВЗАПАСНІ
ЧАСТИНИ

МЕБЛІ
МЕДИЧНІ

УСТАНОВКИ

КРИСЛА ТА
СТІЛЬЦІ

ОСВІТЛЕННЯ

КОМПРЕСОРИ І
ВІДСМОКТУЮЧІ
АГРЕГАТИ

СТЕРИЛІЗАЦІЯ

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ІНСТРУМЕНТИ

ЦИФРОВЕ
ОБЛАДНАННЯ

МІКРОСКОП

МОНІТОРИ

ГІГІЄНА ТА
ПРОФІЛАКТИКААПАРАТ
VECTORІМПЛАНТОЛОГІЯ
І ХІРУРГІЯДЛЯ
ЗУБОТЕХНІЧНИХ
ЛАБАТОРІЙДЛЯ
НАВЧАЛЬНИХ
ЦЕНТРІВЗАПАСНІ
ЧАСТИНИ

Автоклави **MELAquick 12+** класу «S» є ідеальною альтернативою для стерилізації стоматологічних наконечників. Вони здатні простерилізувати до 12 наконечників за один цикл, що значно перевищує можливості звичайних автоклавів. Сушка здійснюється стерильним повітрям через підключення до стоматологічного компресора, але MELAquick 12+ має вбудований компресорний насос, що дозволяє йому функціонувати незалежно від зовнішніх джерел.

Автоклави MELAquick12+ мають 3 програми:

- Універсальна програма «S» 134°C / 2 бар.
- Швидка програма «S» 134°C / 2 бар.
- Антипріонна програма 134°C / 2 бар.



MELAquick 12+

Зовнішні розміри	20,5 см x 46 см x 45 см
Робоча камера	9 x 20 см
Об'єм	1,35 л
Подача води	Демінералізована/дистильована вода
Вага	23 кг
Робочий тиск	Пульсуючим надлишковим тиском
Температура	2,2 бар / 136°C
Живлення	220-240 В / 50-60 Гц / 2.050 Вт / 10 А

MELAquick®12+ без підключення до компресора
10012

MELAquick®12+r з підключенням до компресора
11012

Акcesуари для MELAquick

Код 00125	Універсальна корзина з сіткою для малих інструментів
Код 00122	Тримач з адаптерами ISO для 7 інструментів
Код 00123	Тримач з круглими тримачами для 7 інструментів
Код 00126	Тримач для запакованих інструментів для 3 інструментів
Код 00128	Підставка для корзини та тримачів
Код 00127	Тримач для універсальної корзини



Універсальна
корзина на
підставці

Тримач з адаптерами ISO
для 7 інструментів на
підставці

Тримач з круглими
тримачами для 7
інструментів на підставці

Тримач для
запакованих
інструментів

ПРИСТРОЇ З ПОСТІЙНИМ НАГРІВОМ ДЛЯ ПАКУВАННЯ В ПЛІВКУ

Пристрій для герметичної упаковки **Melaseal 100+** дозволяє надійно запакувати простерилізований інструмент, щоб захистити його від повторного забруднення в процесі зберігання.


MELAseal® 100+

Зовнішні розміри	41,5 x 22 x 15 см
Вага	5,4 кг
Живлення	230 В / 50 Гц / 300 Вт
Код	ME10211



Апарат для термогерметизації **MELAseal 200** поєднує функції MELAseal 100+ з перевагами роликів машин, відповідаючи стандарту EN ISO 11607-2.

Пристрій готується до роботи за 90 секунд, а процес герметизації триває лише 2 секунди, забезпечуючи безперервний режим. MELAseal 200 оснащений дисплеєм, USB-портами, сенсорними клавішами, системою обліку користувачів і можливістю прямого зв'язку з ПК, що робить його еталоном у своєму класі.

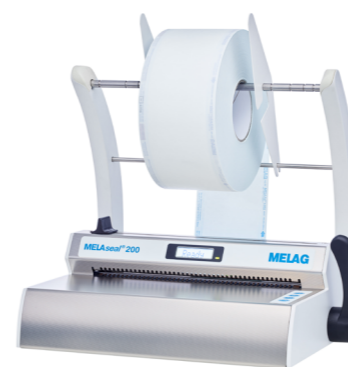

MELAseal 200+

Розміри (В x Ш x Г)	15 x 41,5 x 24 см
Вага	5,4 кг
Живлення	200-240 V, 50/60 Hz
Код	ME10120

MELAseal 300 — це компактний, високоефективний роторний запаювач із Smart-Touch дисплеєм, що підходить для будь-якої лінії стерилізації. Пристрій готовий до роботи вже за 90 секунд, а завдяки автоматичній подачі плівки він забезпечує безперервний процес упаковки великого обсягу інструментів без затримок.

MELAseal 300 поєднує швидкість і надійність, забезпечуючи якісне запаювання, а енергоефективні технології знижують витрати на обслуговування, роблячи цей пристрій економічно вигідним для медичних установ.

MELAseal 300+

Розміри (В x Ш x Г)	16 x 36 x 17,5 см
Вага	5,6 кг
Живлення	200-240 V, 50/60 Hz
Код	ME10300

МЕБЛІ
МЕДИЧНІ

УСТАНОВКИ

КРИСЛА ТА
СТІЛЬЦІ

ОСВІТЛЕННЯ

КОМПРЕСОРИ І
ВІДСМОКТУЮЧІ
АГРЕГАТИ

СТЕРИЛІЗАЦІЯ

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ІНСТРУМЕНТИ

ЦИФРОВЕ
ОБЛАДНАННЯ

МІКРОСКОП

МОНІТОРИ

ГІГІЄНА ТА
ПРОФІЛАКТИКААПАРАТ
VECTORІМПЛАНТОЛОГІЯ
І ХІРУРГІЯДЛЯ
ЗУБОТЕХНІЧНИХ
ЛАБАТОРІЙДЛЯ
НАВЧАЛЬНИХ
ЦЕНТРІВЗАПАСНІ
ЧАСТИНИ



MELAfol (плівки для СТЕРИЛЬНОГО ПАКУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ)

Код 0502	ширина 5 см, довжина рулона 200 м
Код 0752	ширина 7,5 см, довжина рулона 200 м
Код 01002	ширина 10 см, довжина рулона 200 м
Код 01502	ширина 15 см, довжина рулона 200 м
Код 02002	ширина 20 см, довжина рулона 200 м
Код 02502	ширина 25 см, довжина рулона 200 м

ДЛЯ ЕКОНОМНОГО ВИРОБНИЦТВА ДИСТИЛЬОВАНОЇ ВОДИ:

MELAdest 65 забезпечує найбільш економічне та недороге виробництво високоякісної дистильованої води для автоклавів і інших цілей медичної практики.



Meladest 65

Зовнішні розміри	25 x 38 см
Об'єм	4 л
Вага	4,2 кг
Продуктивність	приблизно 0,7 л/год
Живлення	230 В / 50 Гц / 800 Вт
Код	01065

Chamber Protect

Набір для очищення камер MELAG


Надійне очищення та тривалий захист, завдяки якому ваш автоклав сяє. Новий набір для очищення камер MELAG видаляє навіть невидимі для ока забруднення і, таким чином, зберігає камеру від знебарвлення та відкладень.

Користуйтеся перевагами набору Chamber Protect під час очищення камери та лотків раз на тиждень:

- Потужний засіб для чищення з 50 тканинами без ворсу та 1 тканиною з мікрофібри.
- Особливо дбайливий до матеріалу камери та ущільнювача дверцят.
- Схвалено в результаті обширних випробувань на сумісність матеріалів.
- Ідеально підходить до всіх парових стерилізаторів MELAG.



Код: ME01081

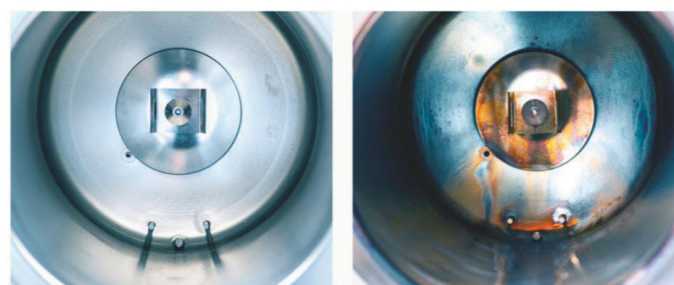

При регулярному використанні Chamber Protect

Без регулярного очищення камери



ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програмне забезпечення **MELAtrace** – це рішення для швидкого та надійного ведення документації і затвердження всієї звітності в сфері обробки інструментів. У програму внесені етапи очистки, дезінфекції та стерилізації. Кожен протокол має захист від фальсифікування.

Інтерфейс MELAtrace розрахований на використання як сенсорного екрану, так і мишки. А при купівлі ліцензії Ви платите лише один раз, немає ніякої щорічної плати та платних підписок.



MELAtrace

Процесор	1 GHz (x86) чи 1,4 GHz (x64), 2 GHz Multi-Core (рекомендовано)
Оперативна пам'ять	1 GB RAM, 4 GB RAM (рекомендовано)
Пам'ять на диску	7 GB простору для інсталяції
	USB порт
	Інтернет з'єднання
ОС	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Windows Server 2012
Програмне забезпечення	Microsoft .NET Framework 3.5/4.5/4.6, Adobe Acrobat Reader
	Windows Media Player
	MELAview 3 (включено в доставку)
Код	21138

ПРИНТЕР ДЛЯ ДРУКУ ЕТИКЕТОК PREMIUM-КЛАСУ

MELAprint 60 сумісний з автоклавами класу Premium, Cliniclave та MELAtrace. Він підключається безпосередньо до мережевого інтерфейсу автоклаву і до існуючої комп'ютерної мережі. Після завершення програми стерилізації на екрані автоклаву відображаються етикетки для ідентифікації інструментів. Для роботи не потрібен додатковий ПК або зовнішнє програмне забезпечення.



MELAprint 60

Розміри (ВхШхГ)	15,5 x 20,5 x 16 см
Електричний роз'єм	змінний струм 110-240 В ±10 %, 50/60 Гц
Температура навколишнього середовища	5 – 45°С
Відносна вологість повітря	20 – 90 % (при 40 °С)
Метод друку	термічний
Роздільна здатність при друці	203 dpi
Швидкість друку	150 мм/с
Ширина друку	макс. 80 мм
Довговічність надрукованих етикеток	25 років (при оптимальних умовах)
Код	01160
Етикетки MELAprint 60	41942

РУЧНИЙ СКАНЕР ШТРИХ-КОДІВ

Цей ручний сканер штрих-кодів підключається до USB-порту робочого ПК та призначений для зчитування штрих-кодів промивальних касет MELAstore-Trays або стерилізаційних контейнерів MELAstore-Boxes в MELAtrace для прив'язки завантаження до циклу MELAtherm або до автоклаву.

З цим ручним сканером ви також можете зчитувати штрих-коди MELAprint 60, щоб прив'язати цю інформацію до записів про пацієнтів.

Поставка, що включає в себе тримач – код **01110**.




GALIT КАСЕТИ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ

Касети для стерилізації GALIT виготовлені за унікальною технологією, яка надає їм матовий вигляд і усуває гострі кромки. Вони виготовлені з нержавіючої сталі та оснащені силіконовими вставками.

Касети мають відтягуючий зажим для фіксації інструментів, який надійно тримає їх у закритому положенні. Силіконові вставки доступні у шести кольорах: фіолетовий, жовтий, пурпурний, червоний, синій і зелений.



ДЛЯ ТРЬОХ ІНСТРУМЕНТІВ
Розмір: 18,0 x 5,0 x 3,0 см.
Код: 006.118.003-00

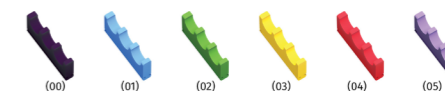

ДЛЯ П'ЯТИ ІНСТРУМЕНТІВ
Розмір: 18,0 x 7,0 x 3,0 см.
Код: 006.118.005-04



ДЛЯ ДЕСЯТИ ІНСТРУМЕНТІВ
Розмір: 18,0 x 13,0 x 3,0 см.
Код: 006.118.010-02



ДЛЯ П'ЯТНАДЦЯТИ ІНСТРУМЕНТІВ
Розмір: 18,0 x 19,0 x 3,0 см.
Код: 006.118.015-01



ДЛЯ ДВАДЦЯТИ ІНСТРУМЕНТІВ
Розмір: 18,0 x 25,0 x 3,0 см.
Код: 006.118.020-05



*останні дві цифри кода вказують на колір силіконових встав

Прайс | Ультразвукові ванни Elma

№	Артикул	Номенклатура	Ціна/грн
1	1097278 1108916 2070300000 1117632	Ультразвукова ванна Elmasonic Med 30 ✓ Корзина для Elmasonic Med 30 ✓ Вставна кришка для двох склянок для Elmasonic Med 30 ✓ Дві склянки з кришкою і кільцем 600 мл	54 560
2	1100677 1113050 2070930000 1117632	Ультразвукова ванна Elmasonic Med 60 ✓ Корзина для Elmasonic Med 60 ✓ Вставна кришка для двох склянок для Elmasonic Med 60 ✓ дві склянки з кришкою і кільцем 600 мл	88 780

Прайс | Стерилізаційне обладнання MELAG

№	Артикул	Номенклатура	Ціна/грн
1	ME10045LS ME11056 ME04517 ME04520 ME00260 ME01056 ME01145 ME80550 ME46891 ME28887	Великий стерилізатор для медичних закладів Cliniclave 45 <ul style="list-style-type: none">Установка зворотного осмосу MELAdem®56Стелаж на дві корзини або чотири піддониДва лоткиКорзина для інструментівПристрій перекривання водиЗавантажувальний візокНапрямна рейка „comfort“ для Cliniclave 45Контактний лотік для розміщення партіїГак для витягування	2 245 850
2	ME10048LS ME11057 ME04517 ME04520 ME00260 ME01056 ME01145 ME80570 ME46891 ME28887	Великий стерилізатор для медичних закладів Cliniclave 45 М <ul style="list-style-type: none">Установка зворотного осмосу MELAdem®56МДва стелажі на дві корзини або чотири піддониЧотири лоткиДві корзини для інструментівПристрій перекривання водиЗавантажувальний візокНапрямна рейка „comfort“ для Cliniclave 45МДва контактних лотіки для розміщення партіїГак для витягування	2 573 680
3	ME10618 ME21778 ME21774 ME84740 ME82400 ME00280 ME10708 ME02607	Стерилізатор паровий Careclave <ul style="list-style-type: none">Тримач короткий для 4 коротких і 2 вузьких лотківтри короткі лотки (18,5 x 13,5)олія для доглядуТримач для піддонів E plusтри стандартних піддони (29 x 19)Carebox blueвісім адаптерів в асортименті	794 350
4	ME10550 ME22606	Стерилізатор паровий Vacuclave 550 <ul style="list-style-type: none">пристрій для витягування VC550 vst.	990 830

	ME22485 ME00550 ME00280 ME00230 ME01047	<ul style="list-style-type: none"> • кронштейн висувний VC550 • два лотка Vacuclave 550 • десять лотків Vacuclave 550 коротких • два лотка Vacuclave 550 довгих • Підготовка води Meladem 47 	
5	ME20021 ME00197	Термодезінфектор MELAtherm 10 DTB Evolution (230V) <ul style="list-style-type: none"> • Базовий кошик 	615 670
6	ME20020 ME00197	Термодезінфектор MELAtherm 10 DTA Evolution (400V) <ul style="list-style-type: none"> • Базовий кошик 	615 670
7	ME10052 ME40246 ME00246	Стерилізатор паровий Vacuklav 24BL+ <ul style="list-style-type: none"> • Тримач лотків C для Vacuklav 24 BL+ • Шість лотків (54 x 19cm) 	326 440
8	ME10118 ME00280 ME82620	Стерилізатор паровий Vacuclave 118 <ul style="list-style-type: none"> • Три лотки (29 x 19cm) • Тримач для лотків A plus 	211 000
9	ME10123 ME00230 ME82630	Стерилізатор паровий Vacuclave 123 <ul style="list-style-type: none"> • Три лотки (42 x 19cm) • Тримач для лотків A plus 	227 830
10	ME10318 ME00280 ME82620	Стерилізатор паровий Vacuclave 318 <ul style="list-style-type: none"> • Три лотки (29 x 19cm) • Тримач для лотків A plus 	244 330
11	ME10323 ME00230 ME82630	Стерилізатор паровий Vacuclave 323 <ul style="list-style-type: none"> • Три лотки (42 x 19cm) • Тримач для лотків A plus 	261 120
12	ME10012 ME00125	Стерилізатор паровий MELAquick 12+ <ul style="list-style-type: none"> • Корзина 	407 350
13	ME11012 ME00125	Стерилізатор паровий MELAquick 12+р (з вбудованою компресорною помпою) <ul style="list-style-type: none"> • Корзина 	420 980
14	ME10080 ME82400 ME00280	Стерилізатор паровий Vacuklav 40 B+ Evolution <ul style="list-style-type: none"> • Тримач для лотків • Шість лотків (29 X 19) 	424 010
15	ME10081 ME82400 ME00280	Стерилізатор паровий Vacuklav 41 B+ Evolution <ul style="list-style-type: none"> • Тримач для лотків • Шість лотків (29 X 19) 	424 010
16	ME10083 ME82700 ME00230	Стерилізатор паровий Vacuklav 43 B+ Evolution <ul style="list-style-type: none"> • Тримач для лотків • Шість лотків (42 X 19) 	460 510
17	ME10084 ME82700 ME00230	Стерилізатор паровий Vacuklav 44 B+ Evolution <ul style="list-style-type: none"> • Тримач для лотків • Шість лотків (42 X 19) 	460 510
18	ME10211 ME10111	Пакувальна машина MELAseal 100+ <ul style="list-style-type: none"> • Тримач рулонів Comfort 	37 910
19	ME10120 ME10111	Пакувальна машина MELAseal 200 <ul style="list-style-type: none"> • Тримач рулонів Comfort 	58 780
20	ME10010	Пакувальна машина MELAseal 300	124 900
21	ME00116	Тримач рулонів (wall-mounted) для MELAseal 300	21 120
22	ME71490	Ніжка для тримача рулонів MELAseal 300	1 760
23	ME00141	Робочий стіл Comfort для MELAseal 300	35 660
24	ME77750	Робочий стіл Standart для MELAseal 300	14 850
25	ME01065	Дистилятор MELAdest 65	18 500
26	ME01160	Принтер для друку етикеток MELAprint® 60	54 670
27	ME41942	Етикетки MELAprint 60	12 200
28	ME01144	Принтер для друку етикеток MELAprint® 44 log printer	45 960

29	ME01075	Гелікс тест MELAcontrol Pro	10 140
30	ME01047	Установка зворотного осмосу MELAdem 47	95 380
31	ME01038	Установка зворотного осмосу MELAdem 53	102 870
32	ME01081	Набір для очищення камер Chamber Protect	1 340
33	ME02002	MELAfol 2002 (20 cm x 200 m)	6 790
34	ME01002	MELAfol 1002 (10 cm x 200 m)	4 150
35	ME00502	MELAfol 502 (5 cm x 200 m)	2 870
36	ME02502	MELAfol 2502 (25 x 200 m)	8 480
37	ME01502	MELAfol 1502 (15 cm x 200 m)	5 470
38	ME00752	MELAfol 752 (7,5 cm x 200 m)	3 370
39	ME11630	Очисний засіб MEtherm 51	4 290
40	ME11621	Нейтралізатор С MEtherm 55	3 240
41	ME11627	Ополіскувач MEtherm 61	1 060
42	ME01110	Сканер штрих коду	9 130
43	ME10118S ME00280 ME82620	Стерилізатор паровий Vacuclave 118S <ul style="list-style-type: none"> • Три лотки (29 x 19cm) • Тримач для лотків A plus 	170 830
44	ME10123S ME00230 ME82630	Стерилізатор паровий Vacuclave 123s <ul style="list-style-type: none"> • Три лотки (42 x 19cm) • Тримач для лотків A plus 	190 990
45	ME10105 ME23446	Швидкий автоклав Vacuclave 105 <ul style="list-style-type: none"> • Два лотки 	191 950
46	ME10305 ME23446	Швидкий автоклав Vacuclave 305 <ul style="list-style-type: none"> • Два лотки 	205 990
47	ME10105SB ME23446	Швидкий автоклав SteriHero Speed+ <ul style="list-style-type: none"> • Два лотки 	187 600

Дата: 26.04.2025