



GALIT
EXPERTS IN DENTISTRY



MI Series

Освітлення для догляду за пацієнтами

Незалежно чи проводите Ви хірургічні операції, чи огляди, надзвичайно важливо, щоб умови освітлення сприяли ефективній і максимально точній роботі. І тут не може бути компромісів. Компанія Medical Illumination зосереджена на тому, щоб зробити це можливим.

Світильники серії MI значно яскравіші, із більшим та холоднішим світлом. Таким чином, Ви отримуєте найяскравіші, найточніші кольори з чудовим контролем тіні - і практично без тепловиділення, що дозволяє створити комфортні умови для роботи. І все це за ціною, над якою Ви не будете перейматися.

MI Series

- ✓ 4,300° К чисте біле світло
- ✓ 100,000/75,000/55,000 lux
- ✓ 50,000 годин експлуатації LED
- ✓ Чудовий контроль тіней
- ✓ Практично нульове випромінювання тепла
- ✓ Широкий вибір кріплень для максимальної зручності






Для ще кращого контролю

Керування яскравістю та положенням Ваших світильників має вирішальне значення. З серією MI це неймовірно зручно: просто підніміть руку і натисніть центральну кнопку на стерильному багаторівневому регуляторі яскравості.

Ідеальний баланс і контроль тіней

Кронштейн кожного прожектора серії MI збалансований і шарнірно з'єднаний, щоб забезпечити максимальний радіус і діапазон позиціонування з дивовижною легкістю.

Кілька освітлювальних елементів і платформа великого діаметру, особливо у світильнику MI-1000, забезпечують дивовижну потужність світлового потоку разом з чудовим контролем тіні, щоб Ви могли оглядати об'єкт у максимально комфортних і сприятливих умовах.



Багатоступеневе регулювання яскравості та поля освітлення легко контролюється за допомогою ручки, що стерилізується.




Наука і медицина зустрілися разом

Ніхто інший не дійшов до таких високих технологій, як Medical Illumination. Доведення медичного освітлення до досконалості - це ціль Medical Illumination. Розробляючи серію MI, компанія створила максимально чисте, рівномірне, біле світло, беручи до уваги не тільки те, як працюють світлодіоди, але й те, як людське око сприймає колір. Результатом стала чудова оптична технологія, яка встановлює нові стандарти в хірургічному освітленні.

● Щоб компенсувати властиві світлодіодам недоліки кольору, розроблена лінза, яка об'єднує всі випромінювані кольори в один сфокусований промінь дуже білого світла, забезпечуючи неперевершену точність передачі кольору.

● Усі світильники серії MI оснащені спеціальною передньою розсіювальною лінзою, яка індивідуально перенаправляє кожен промінь в єдине, когерентне, рівномірне світлове поле.

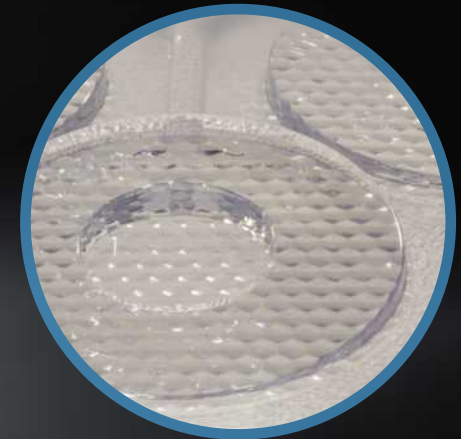

MI серія - це три унікальні світильники з безмежними можливостями освітлення.

Серія MI пропонує на вибір три світильники різних розмірів. Виберіть для себе найкращий варіант для освітлення операційної, процедурної або оглядової кімнати.

MI-1000 чудове освітлення в операційну.

Ідеальний для використання в хірургічному середовищі MI-1000, довговічний світильник у доступній ціні. Світлодіодна матриця великого діаметру забезпечує відмінний контроль тіні - навіть з однією світловою головкою. Натискання центральної кнопки на ручці дозволяє здійснювати 5-ступеневе регулювання яскравості, плюс режим розсіяного світла для малоінвазивних процедур.

- 100 000 LUX на відстані 1 метра
- 4 300° K чистого білого кольору
- CRI 97



MI-1000
Подвійне кріплення на стелю



MI серія

MI-750 - найкращий вибір для яскравих результатів лікування

Ідеальний і на диво доступний середньогабаритний ліхтар для невеликих хірургічних операцій, процедур та оглядів. MI-750 забезпечує максимальну яскравість, різкість і точність передачі кольору. Таким чином, Ви можете візуалізувати свою роботу в найточніший спосіб. 3-ступиневе регулювання яскравості за допомогою ручки, що стерилізується.

- 75 000 LUX на відстані 1 метра
- 4 300° K чистого білого кольору
- CRI 97



MI-750
Подвійне кріплення на стелю



MI серія

MI-550

ідеальне рішення для оглядової та діагностичної. Він забезпечує максимальну яскравість, різкість і точність передачі кольору. Таким чином, Ви можете виконувати свою роботу з максимальною точністю.

- 55 000 LUX на відстані 24" (60 см)
- 4 300° K чисто білий
- CRI 97

Ручка для контролю, що автоклавується

Кріплення на стіну

Портативна стійка

Подвійне кріплення на стелю

Кріплення на стелю

Кріплення на стіну

Створіть освітлення відповідно до Ваших потреб

Серія MI надає вам повну гнучкість при проєктуванні освітлення в операційній, відділенні швидкої допомоги, реанімації, клініці або офісі. Завдяки подовженому, повністю модифікованому кронштейну (тепер 167,6 см), світильники MI-1000, MI-750 і MI-550 доступні у варіантах для монтажу на стелю, на стіну чи портативного кріплення. Також доступна опція резервного живлення від акумулятора.

Додаткове 7-годинне резервне живлення від акумулятора для портативних і стельових/настінних кріплень (MI-1000, MI-750)





Мислення у яскравому світлі

Протягом останніх 30 років метою компанії Medical Illumination є забезпечення медичної галузі найефективнішими та найвигіднішими за ціною освітлювальними приладами для хірургічних операцій, процедур та оглядів. Жоден інший виробник не має ціннішої пропозиції. Ось чому так багато лікарів і хірургів обирають прилади Medical Illumination, щоб освітити свій шлях.

Офіційним представником Medical Illumination в Україні є компанія GALIT.

ПП «Галіт»
вул. 15 Квітня, 6Є, с. Байківці,
Тернопільський р-н, 47711, Україна
0 800 502 998
office@galit.te.ua
service@galit.te.ua

Proudly made the USA

