


GALIT
EXPERTS IN DENTISTRY

DUVO

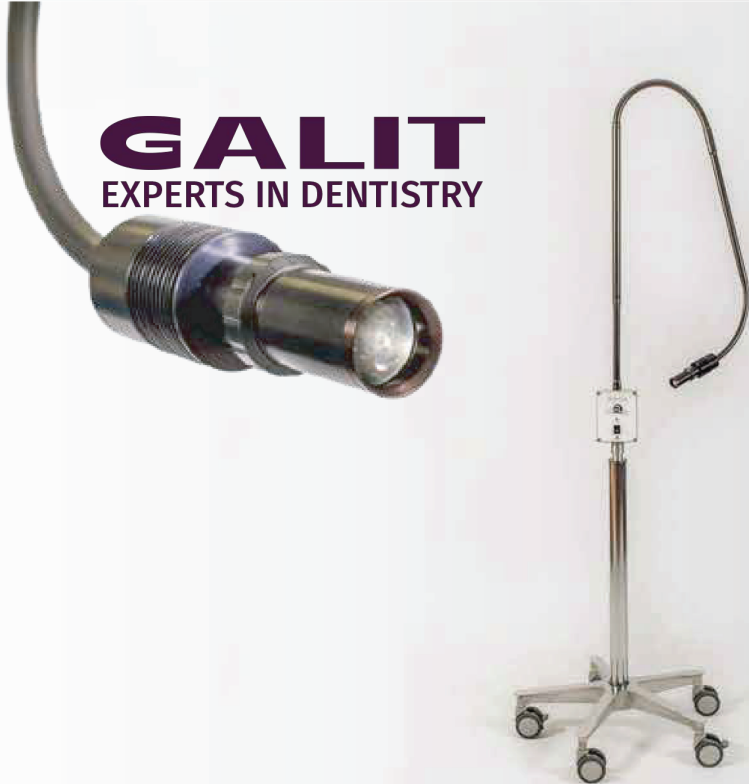

IsoLED Flex I: Оглядовий світильник на мобільній стійці

IsoLED Flex I — це оглядовий та діагностичний світильник із живленням від батареї, який ідеально підходить для використання в клінічних умовах, особливо:

- Стоматологія
- ЛОР
- Практика пластичної хірургії
- Дерматологія
- Акушер/Гінеколог
- Ветеринарна практика

Оптика: світильник для клінічного обстеження IsoLED Flex I має один світлодіодний чіп, що забезпечує яскравість 45 000 люкс на відстані 300 мм (12 дюймів). Flex I має регульовану діафрагму, яка дозволяє точно контролювати діаметр плями, і рейтинг CRI 92, що забезпечує дуже високу передачу кольорів для точної діагностики. Використання оптики з різким зрізом дозволяє отримати чітку точку з хорошою глибиною різкості. Інтенсивність можна регулювати від 3% до 100%.

Портативність: завдяки акумуляторній батареї та п'ятиколісній базі Flex I забезпечує мобільність без обтяження шнуром живлення. Він також має гнучкий тримач (гусячу шию), який дозволяє розташувати його під будь-яким кутом або на відстані від пацієнта під час обстеження або процедури в медичному кабінеті. Flex I можна сконфігурувати за допомогою настінного кріплення, кріплення на столі або з підставкою на п'яти колесах.

Акумулятор: з більш ніж 10 годинами повної інтенсивності, Flex I пропонує цілодобове рішення для кабінету лікаря або амбулаторного медичного закладу. Високоєфективна конструкція Flex I зменшує споживання енергії та вартість володіння, а його 50 000 годин роботи світлодіодів забезпечують пристрій, який не потребує обслуговування. Крім того, виготовлений дизайн Flex I перевершує вимоги Energy Star.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість Світлодіодів	Один Теплий Білий Світлодіод
Колірна температура	4,000 °К
Індекс Передачі Кольору(CRI)	92 Типовий
Інтенсивність Світла при 12"	> 45,000 Люкс
Робоча Відстань	12" до 24"
Розмір плями (Керування діафрагмою)	½" до 3½"
Термін служби світлодіодів	> 50,000 Годин
Робоча Температура	10 °C до +50 °C
Електроенергія	Акумуляторна батарея 14,8 вольт (4x18650 елементів), перезаряджувані Літій-іонні батареї – 3,5 А - ємність на годину
Мінімальний Час Роботи	10 годин безперервної роботи при максимальній інтенсивності освітлення.
Ефективність	Відповідає вимогам Energy Star
Затемнення	3% до 100%
Елементи Керування	<ul style="list-style-type: none"> • Вмикач • Вимикач живлення • Зелений індикатор увімкнення • Контроль яскравості
Зарядний пристрій, універсальний вхід змінного струму 15,1 Вт	Сертифіковано UL відповідно до IEC60601-1, 1988, 2-е видання
Вага	12.5 фунтів

☎ 0-800-502-998

🌐 www.galit-dental.com

✉ office@galit.te.ua

📍 47711, Тернопільський р-н, с. Байківці, вул. 15 Квітня, 6Є