


# **GALIT**

**EXPERTS IN DENTISTRY**

## **GALLANT LIGHT**



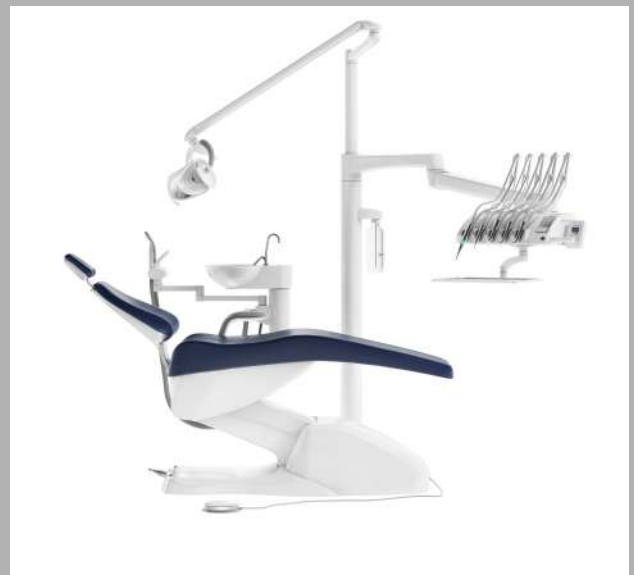

**Чому лікарі обирають GALLANT LIGHT для своєї щоденної практики?**

## **ДОВГОВІЧНІСТЬ**

*Основним матеріалом для виготовлення установки GALLANT LIGHT є алюміній, що забезпечує її легкість. Конструкція без зварювальних швів усуває ризик корозії. Це означає, що установка не ржавіє з часом, зберігаючи свій естетичний вигляд та функціональність на довгі роки.*

## **ЯКІСТЬ**

*Стоматологічна установка GALLANT LIGHT створена виключно з високоякісних деталей від провідних європейських виробників. У ній інтегровані інноваційні рішення, що не лише підвищують ефективність роботи стоматолога, але й значно спрощують сервісне обслуговування обладнання.*

## **СТИЛЬНИЙ ДИЗАЙН**

*Елегантний дизайн, втілений у простій і мінімалістичній конструкції стоматологічної установки, робить модель GALLANT LIGHT ідеальним рішенням для невеликих приміщень.*

## **НАЙКРАЩА ЦІНА**

*Функціональна базова стоматологічна установка, розроблена для того, щоб зберегти ваші кошти і не втрати якості обладнання. Ви отримуєте високоякісний продукт за доступною ціною, що робить модель GALLANT LIGHT чудовим вибором для Вашої стоматологічної практики.*

Висока якість, стильний дизайн, доступна ціна – GALLANT LIGHT.



## GALLANT LIGHT - інновації, які забезпечують відмінний результат за вигідною ціною



**Мікромотор NUCLEUS LED від TKD з панеллю керування Duorad** — безщітковий мікромотор, що не потребує змащення. Мікромотор швидкістю 100–40 000 об/хв розроблений для ендодонтичних процедур. Має функції Auto-Stop, Auto-Reverse, Auto-Forward і Rocking/Reciproc.

**Блок підготовки WAS Durr Dental** забезпечує регулювання тиску та фільтрацію води і повітря, які поступають на установку. При вимкненні установки автоматично перекриваються канали води та повітря, підвищуючи безпеку та надійність системи.



**Система чистої води MBS Mytronic** забезпечує автоматичне випускання повітря при відкручуванні пляшки. Завдяки широкій горловині наповнення й очищення відбуваються легко та швидко. Пляшка термостійка до 95°C, що робить її придатною для обробки в термодезінфекторі.

**3-х функційний пустер 3FP-S Mytronic** вагою лише 35 г, що на 2/3 менше ніж звичайний металевий пустер. Має функцію швидкого від'єднання для легкого встановлення одноразових насадок. Майже не виділяє тепла завдяки спеціальному покриттю. А м'яка ручка запобігає ковзанню та забезпечує безпечне використання.





# **GALIT**

ПП «Галіт»  
вул. 15 Квітня, 6Є, с. Байківці,  
Тернопільський р-н, 47711, Україна

0 800 502 998

[office@galit.te.ua](mailto:office@galit.te.ua)  
[service@galit.te.ua](mailto:service@galit.te.ua)

**CE** 2797

Версія: 20240104

Технічна специфікація чи зовнішній вигляд обладнання можуть бути змінені без попереднього узгодження.