



Штаб-квартира: 9F, 10F, будинок D1, парк Наньшань, бульвар Сюеюань 1001, вулиця Таоюань, район Наньшань, Шеньчжень, Китай

ВЕБ: www.fussengroup.com

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ:

sales@fussengroup.com

international.support@fussengroup.com

international.marketing@fussengroup.com



АВТОРИЗОВАНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР

GALIT
EXPERTS IN DENTISTRY

ВУЛ. 15 КВІТНЯ, 6Є, С. БАЙКІВЦІ, ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н,
47711, УКРАЇНА



0 800 502 998



office@galit.te.ua
service@galit.te.ua

FUSSEN

F100

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ РАДІОВІЗІОГРАФ



V1.0 20240301

ПРО FUSSEN

FUSSEN є провідним світовим постачальником цифрових рішень для стоматології. З моменту свого заснування, в 2010 році, FUSSEN планує комплексні цифрові рішення для стоматологічних клінік, сприяючи цифрованому управлінню обладнанням для обробки зображень і підтримуючи стоматологічну галузь у досягненні повного управління життєвим циклом. Продукція FUSSEN поширюється в понад 50 країнах світу, обслуговуючи понад 80 000 стоматологічних клінік по всьому світу. Завдяки широкій продуктивній лінії та розширеним функціям програмного забезпечення, ми пропонуємо різноманітні комбінації продуктів для задоволення унікальних потреб різних клінік і ринків, що робить нас кращим вибором для стоматологів.



СТОМАТОЛОГІЧНІ ПРОДУКТИ

ВИСОКА ЧІТКІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Висока
чутливість


Якість
зображення
HD

Низька
радіація

Два
варіанти
розміру


НАДІЙНІ ДЕТАЛІЗОВАНІ ЗОБРАЖЕННЯ

Детектор високої чіткості CMOS APS із фактичною роздільною здатністю до 25 lp/mm забезпечує чітку видимість таких деталей, як коріння та пародонтальні мембрани.

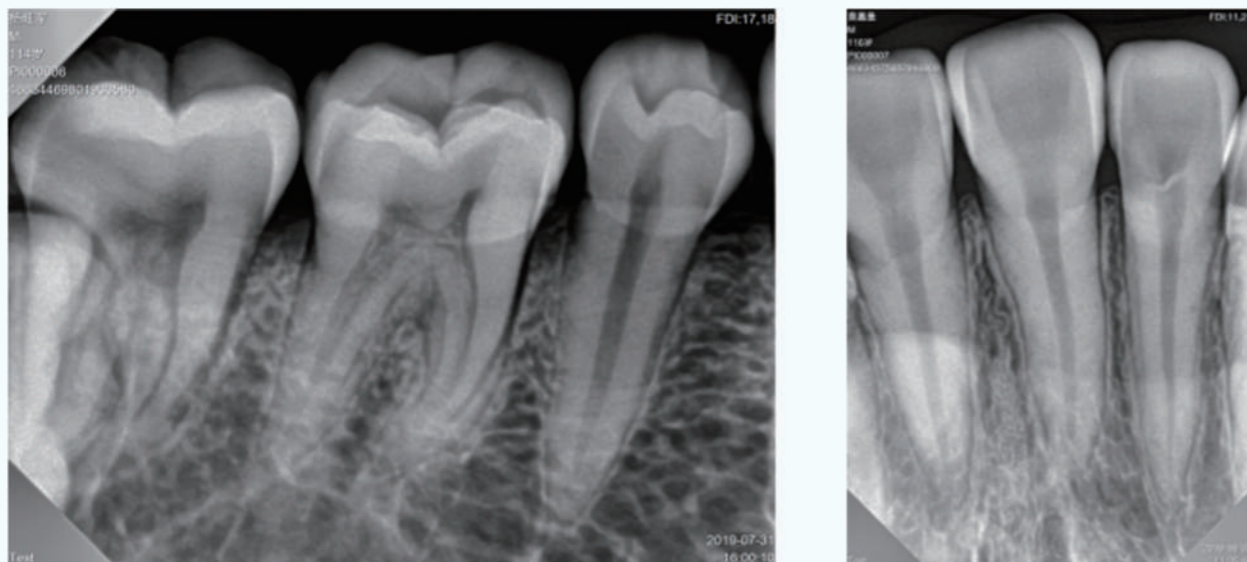

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТУ ПАЦІЄНТІВ

Датчик товщиною 4,5 мм, з плавними формами і заокругленими кутами, легко позиціонувати для зйомки, при цьому забезпечуючи комфорт для пацієнта.

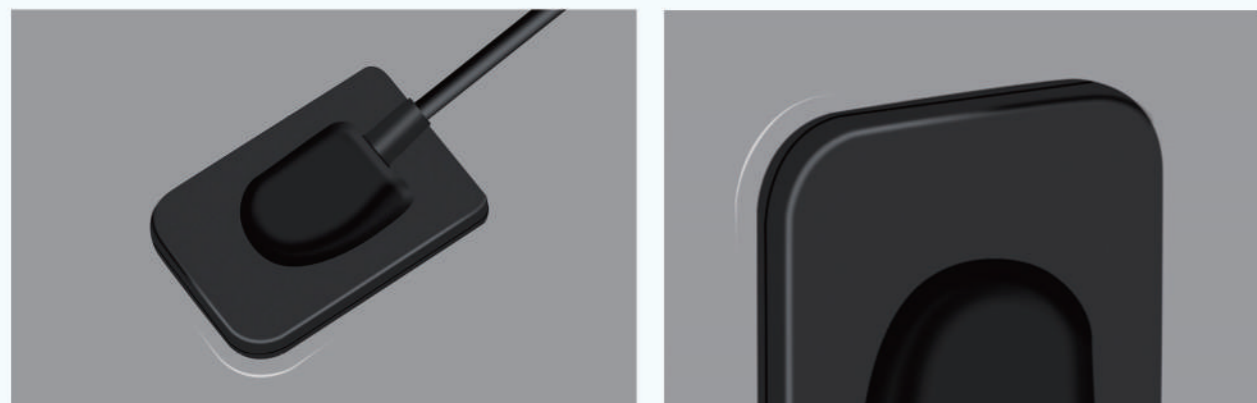

НАДНИЗЬКА ДОЗА ОПРОМІНЮВАННЯ

- ⌚ Висока чутливість дозволяє швидко отримати зображення за 5 секунд із меншим опроміненням пацієнта порівняно з PSP.



ЗРУЧНІСТЬ У КОРИСТУВАННІ

- Пряме підключення USB



- Доступний у двох варіантах розміру



- Захист від пилу та води



- Простий і автоматизований робочий процес



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	ДАТЧИК F100
Роздільна здатність	25 lp/mm
Відтінки сірого	16 біт
Розмір пікселя	20 мкм
Детектор	CMOS APS
Довжина кабелю	2,7м
Товщина	4,5 мм

МОДЕЛЬ	ДАТЧИК F100 РОЗМІР 1	ДАТЧИК F100 РОЗМІР 2
Активна зона	20x30 мм	26x35 мм
Розміри	25,0x38,5x4,5 мм	31,0x45,0x4,5 мм
роздільна здатність	1000x1500	1300x1800