



Штаб-квартира: 9F, 10F, будинок D1, парк Наньшань, бульвар Сюеюань 1001, вулиця Таоюань, район Наньшань, Шеньчжень, Китай

ВЕБ: [www.fussengroup.com](http://www.fussengroup.com)

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ:

[sales@fussengroup.com](mailto:sales@fussengroup.com)

[international.support@fussengroup.com](mailto:international.support@fussengroup.com)

[international.marketing@fussengroup.com](mailto:international.marketing@fussengroup.com)



## АВТОРИЗОВАНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР

**GALIT**  
EXPERTS IN DENTISTRY

ВУЛ. 15 КВІТНЯ, 6Є, С. БАЙКІВЦІ, ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н,  
47711, УКРАЇНА



0 800 502 998



[office@galit.te.ua](mailto:office@galit.te.ua)  
[service@galit.te.ua](mailto:service@galit.te.ua)

# FUSSEN

# S6500

## ВНУТРІШНЬОРОТОВИЙ СКАНЕР



CE NMPA FDA LISTED

V1.0 20240301

## ПРО FUSSEN

FUSSEN є провідним світовим постачальником цифрових рішень для стоматології. З моменту свого заснування, в 2010 році, FUSSEN планує комплексні цифрові рішення для стоматологічних клінік, сприяючи цифрованому управлінню обладнанням для обробки зображень і підтримуючи стоматологічну галузь у досягненні повного управління життєвим циклом. Продукція FUSSEN поширюється в понад 50 країнах світу, обслуговуючи понад 80 000 стоматологічних клінік по всьому світу. Завдяки широкій продуктивній лінії та розширеним функціям програмного забезпечення, ми пропонуємо різноманітні комбінації продуктів для задоволення унікальних потреб різних клінік і ринків, що робить нас кращим вибором для стоматологів.



## СТОМАТОЛОГІЧНІ ПРОДУКТИ

# ПЕРЕВИЗНАЧЕННЯ ЦИФРОВОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

Калібрування  
не потрібне

Відкрийте  
Сумісність  
системи

Ніяких  
ліцензійних  
зборів


Насадки,  
які можна  
автоклавувати

Високотехнологічний  
інтраоральний  
сканер

Зручний  
інтерфейс

Призначений для  
будь-якого  
стоматологічного  
лікування (ортодонція,  
протезування,  
імплантація, зубні  
протези)

# ПОЗА МЕЖАМИ

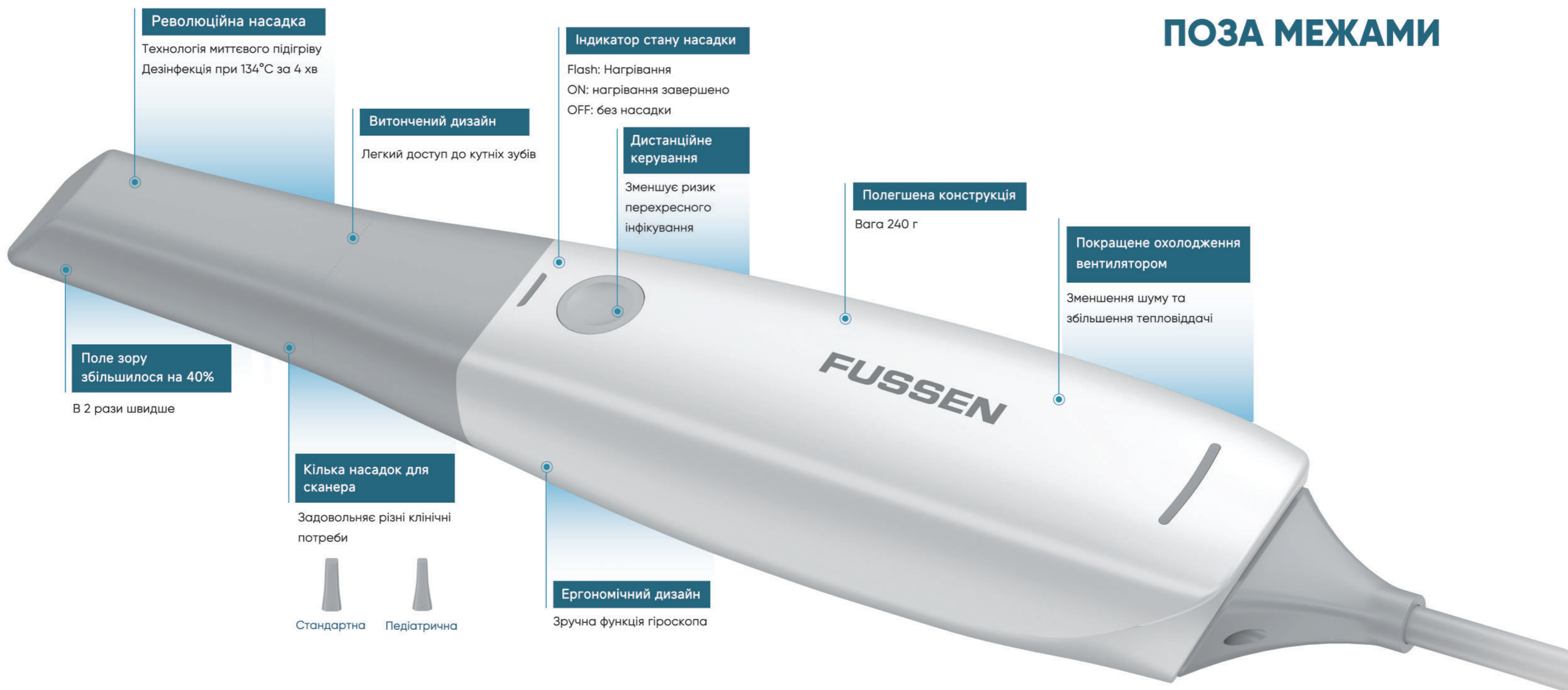

## Революційна насадка

Технологія миттєвого підігріву  
Дезінфекція при 134°C за 4 хв

## Витончений дизайн

Легкий доступ до кутніх зубів

## Індикатор стану насадки

Flash: Нагрівання  
ON: нагрівання завершено  
OFF: без насадки

## Дистанційне керування

Зменшує ризик  
перехресного  
інфікування

## Полегшена конструкція

Вага 240 г

## Покращене охолодження вентилятором

Зменшення шуму та  
збільшення тепловіддачі

## Поле зору збільшилося на 40%

В 2 рази швидше

## Кілька насадок для сканера

Задовольняє різні клінічні  
потреби



Стандартна



Педіатрична

## Ергономічний дизайн

Зручна функція гіроскопа

# DentalFlex

## СКАНУВАННЯ ЩЕ НІКОЛИ НЕ БУЛО ТАКИМ ПРОСТИМ!


Погляньте на наш плавний робочий процес сканування



Час повного сканування  
3-5 хв



Час вирівнювання прикусу  
5 с

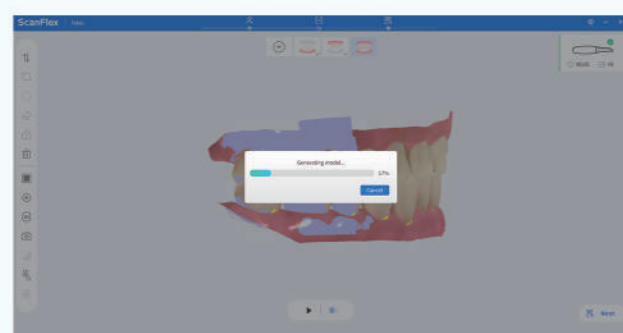


Процес оптимізації  
1-2 хв

**ПРЯМЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ХМАРИ В ОДИН КЛІК**




## КЛІНІЧНІ ПРОЦЕДУРИ СТАЛИ ЩЕ ЕФЕКТИВНІШИМИ

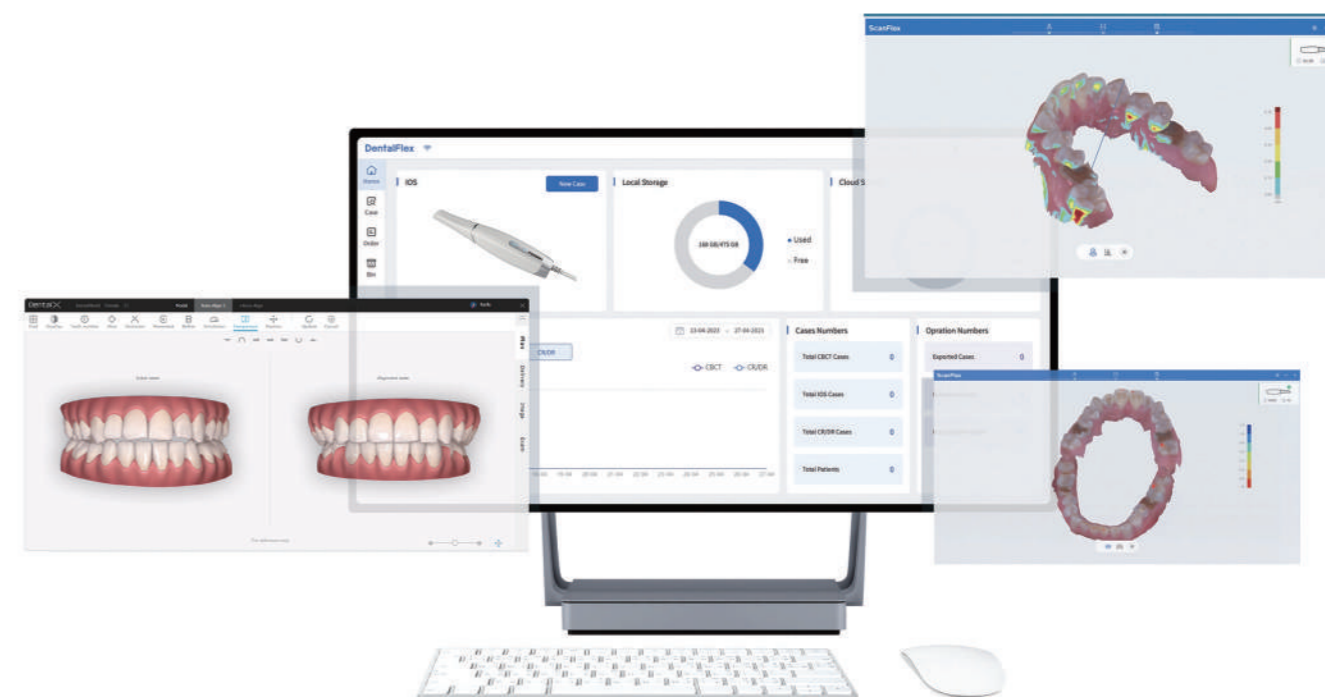

## ВІДКРИТИ ЕКСПОРТ ФАЙЛУ

Експорт у форматі .STL, .PLY, .OBJ, який сумісний з усіма програмами CAD для стоматології (Exocad / 3Shape / Dental Wings)

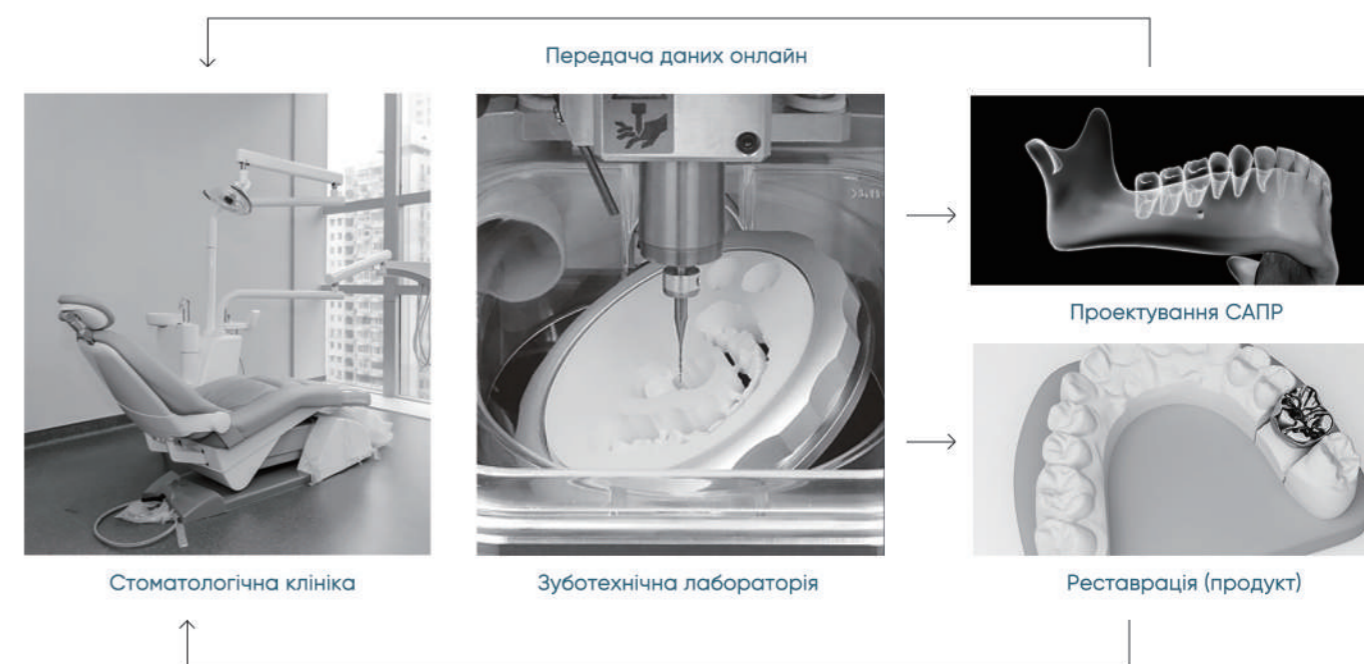

# DentalFlex

## ПЕРЕДОВИЙ ЦИФРОВИЙ ІНСТРУМЕНТ



### ● Інструменти вимірювання

Виконуйте надійні вимірювання своїх цифрових файлів




### ● Вибір робочої зони

Збільшує щільність сітки після завершення оптимізації




### ● Блокуючий інструмент

Для захисту даних області в разі повторного сканування

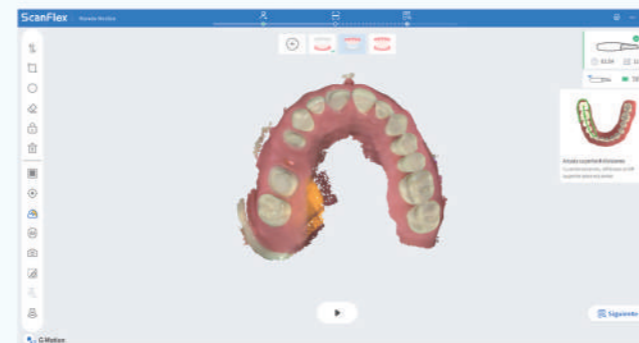


### ● Карта надійності

Помаранчевим кольором позначено області нереальних даних

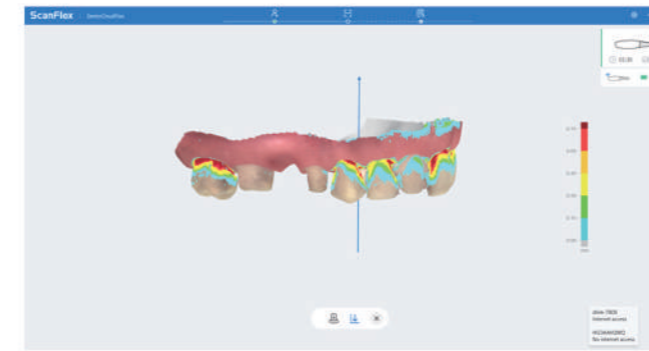



### ● Аналіз підрізу

Забезпечує найкращу відповідність вашій реставрації

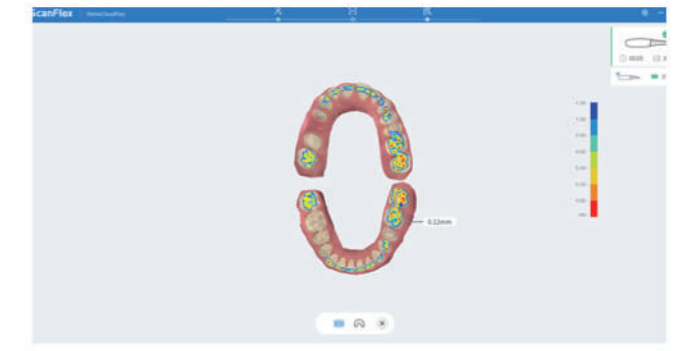


### ● Аналіз оклюзії

Дозволяє спостерігати та вимірювати контактні точки в мм

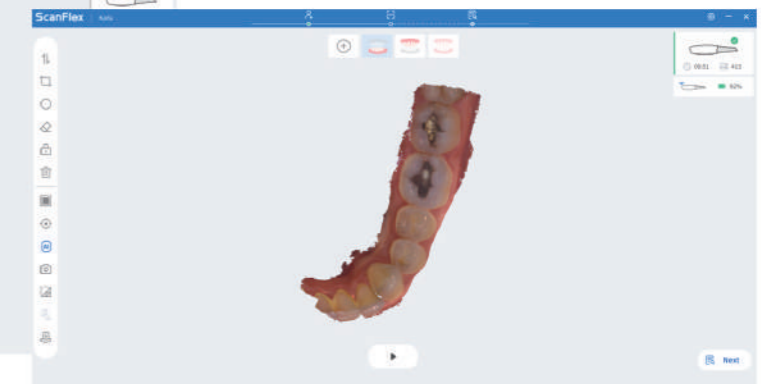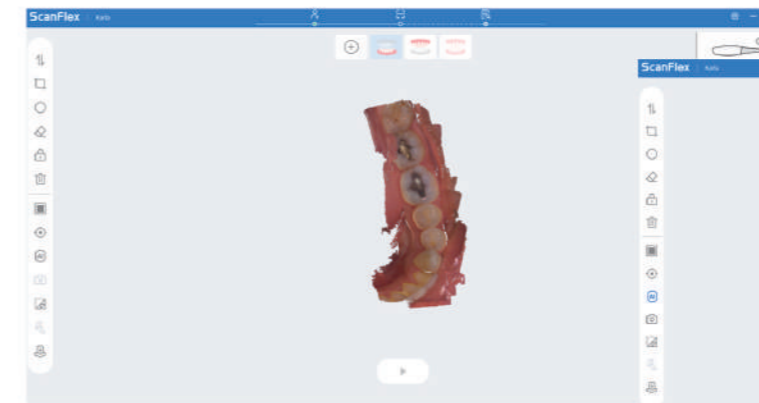

### ● Штучний інтелект


Автоматично видаляє будь-які непотрібні дані, такі як рукавички, язик, губи, слизова ротової порожнини тощо

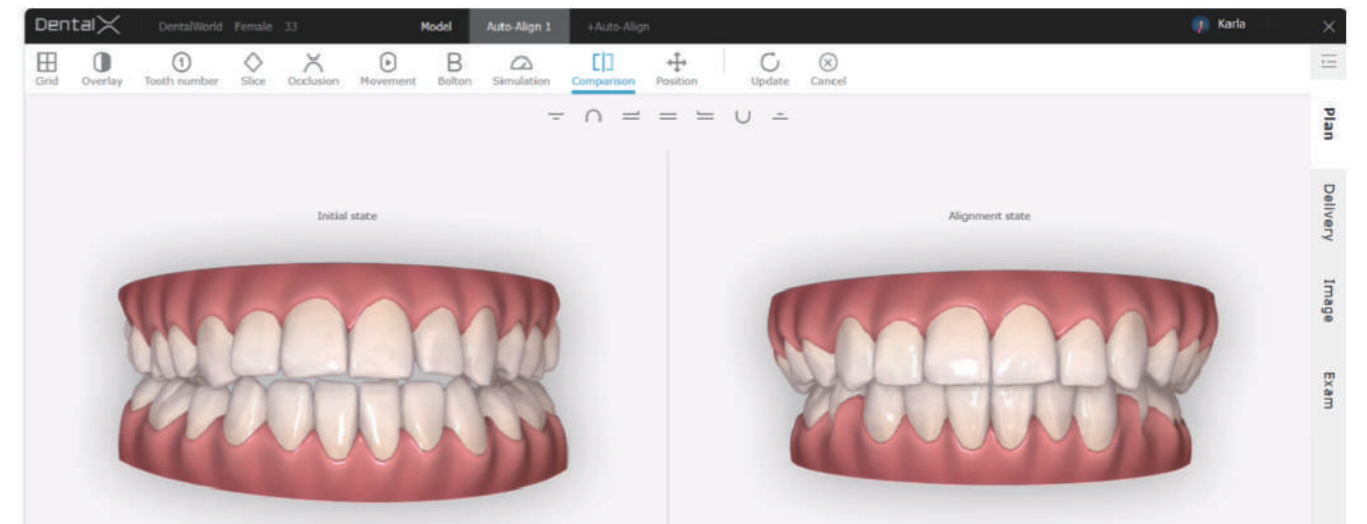

### ● Ортодонтитичний тренажер

Залучає пацієнта до ортодонтитичного лікування та покращує спілкування між клініцистом і пацієнтом

## РОЗБЛОКУЙ ЦИФРОВУ ТРАНСФОРМАЦІЮ!

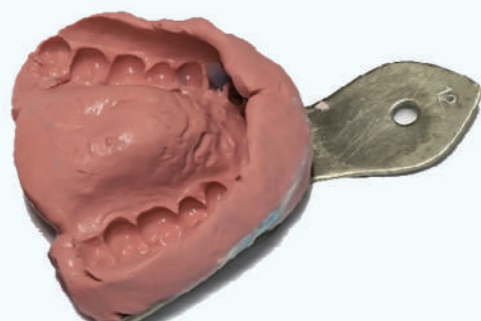

### Традиційний стоматологічний відбиток

Тривала процедура

Високий ризик блювотного рефлексу

Дискомфорт пацієнта

Більш тривалий час реабілітації пацієнта

Можливі помилки спілкування та непорозуміння між стоматологами та зубними техніками

### Цифровий відбиток за допомогою внутрішньоротового сканера

Скорочена процедура

Високий ризик блювотного рефлексу

Максимальний комфорт для пацієнта

Забезпечує лікування за один візит

Спілкування в реальному часі між стоматологами та зубними техніками

## ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

МОДЕЛЬ	ВНУТРІШНЬОРІТОВИЙ СКАНЕР S6500
Точність Single Crown	10 мкм (±1 мкм)
Технологія Anti-Fog	Вбудований автоматичний вентилятор опалення
Формат виводу	STL / PLY / OBJ
Довжина кабелю	2м
Передача даних	USB 3.0
Розмір скануючої головки	Стандарт: 95,3 мм x 22,5 мм x 16,6 мм Педіатричний: 94 мм x 17,9 мм x 13,2 мм
Насадки, які можна автоклавувати	Стандартна*3 / Педіатрична *1 Стерилізація при 121°C протягом 30 хв Можна автоклавувати 100-150 разів
вага	≤ 240 г
Розмір сканера	240 мм (Д) × 45 мм (Ш) × 36 мм (В)
датчик	Високошвидкісний CMOS
Вимоги до операційної системи	i7-13700HX 2,10 ГГц NVIDIA GeForce RTX 4060 6G 32G 1TB SSD / Window 11 64-бітна роздільна здатність 1920*1080 / USB-Type 3.2 Gen 1