

Мийно-дезінфікуючі машини MELAG

Для оптимізації робочого процесу

Очищення та дезінфекція за допомогою термодезінфектора MELAG є найбезпечнішим і найефективнішим способом забезпечення надійної знезараження інструментів. Скористайтеся перевагами та захистіть своїх пацієнтів і команду:



Ефективність:

Зменшення робочого навантаження та економія часу та грошей



Безпека:

Підвищення безпеки за рахунок мінімізації контакту персоналу з інструментами



Відповідність законодавству:

Ведення протоколів процесу знезараження забезпечує можливість відтворення




Оптимізація процесу:

Відразу ж доступність не хірургічних інструментів після автоматичного очищення та дезінфекції (відповідно до національних стандартів)

Окупність лише через 25 місяців з MELAtherm®

Витрати

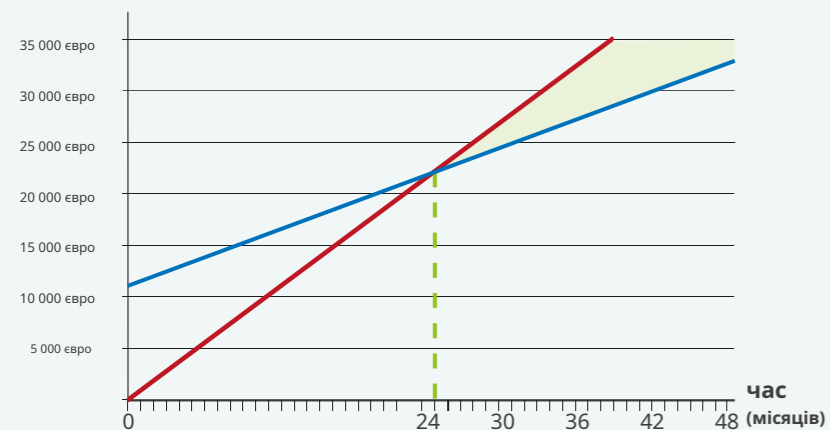

ручне знезараження

автоматичне знезараження за допомогою MELAtherm®10

Кількість робочих днів на місяць - 22
Циклів на день - 2
Погодинна оплата асистента - 18,5 євро
Вартість дезінфекційної ванни - 1,8 євро
Витрати на засоби, електроенергію, воду - 2 євро
Час роботи на ручну дезінфекцію (год) - 1
Час роботи на автоматичну дезактивацію (год) - 0,25
Вартість циклу дезінфекції (вручну) - 20,3 євро
Вартість циклу дезінфекції (автоматично) - 6,63 євро

Витрати на місяць (вручну) 893,20 євро
Витрати на місяць (автоматично) 437,33 євро

Контрольний список для термодезінфекторів

Порівняйте нас з іншими виробниками

Ми переконані в якості, надійності та інноваційних перевагах наших мийно-дезінфікуючих машин. У наступному контрольному списку підсумовано основні характеристики продукту, щоб полегшити порівняння наших мийно-дезінфікуючих машин із пристроями інших виробників на ринку.

Особливості продукту	Ваші переваги	MELAtherm®10 Evolution			
Активне сушіння	➔ Активна внутрішня та зовнішня сушка захищає ваші інструменти від корозії та пошкоджень, а також збільшує термін їхньої експлуатації	✓			
Інтуїтивно зрозуміле керування	➔ Сенсорний дисплей із вбудованими відеоуроками забезпечує безпечну роботу пристрою.	✓			
Інтеграція	➔ Інтегровані технологічні інгредієнти та дозатор економлять цінний простір в приміщенні для стерилізації	✓			
Рідкі технологічні засоби	➔ Автоматичне дозування рідких технологічних засобів гарантує ідеальні результати очищення та сушіння.	✓	✓		
Документація	➔ За допомогою CF-карти та двох мережевих адаптерів передача файлів журналу виконується простим і законодавчо сумісним способом без необхідності додаткових програмних рішень.	✓			
Підтвердження партії на пристрої	➔ Аутентифікація користувача та затвердження партії дають змогу негайно використовувати нехірургічні інструменти (будь ласка, дотримуйтеся національних стандартів).	✓			
Оптимізована мийна камера	➔ Камера забезпечує ефективне завантаження, швидкий час циклу та низькі витрати на споживання лише близько 1 євро/цикл.	✓			
Центральний фільтр, який очищається	➔ Інноваційний контрольний індикатор інжекторної рампи надійно перевіряє роботу фільтра. Якщо індикатор не спрацьовує, фільтр може бути швидко та легко очищений	✓			
Обробка наконечників скалера	➔ Знезараження наконечників ультразвукового скалера за допомогою динамометричного ключа гарантує максимальну безпеку користувача.	✓			
Контроль тиску ополіскування і ополіскувачів	➔ Моніторинг цих параметрів забезпечує абсолютну надійність процесу.	✓	✓		
Розширені цикли обслуговування	➔ Цикл технічного обслуговування тривалістю 24 місяці або 1000 циклів зменшують витрати на поточне обслуговування	✓			
Відгуки клієнтів	➔ Надихайтеся іншими MELAtherm®10 клієнтів на www.melag.com/en/references	✓			



Ви вже задоволені нашими паровими стерилізаторами MELAG? Купуючи термодезінфектор MELAG, скористайтеся перевагами економії, досягнутої завдяки скоординованому технічному обслуговуванню та перевірці!

MELAtherm®10 Evolution

Комфорт і продуктивність доведені до досконалості

MELAtherm®10 Evolution поєднує в собі випробувані функції MELAtherm®10 із рядом інноваційних технологій. З максимальною продуктивністю та максимальним комфортом MELAtherm®10 Evolution забезпечує ще більш ефективний процес дезінфекції інструментів.

80 різних кошиків та інших аксесуарів доступні для MELAtherm® 10 Evolution дозволяє підібрати індивідуальну конфігурацію відповідно до індивідуальних потреб клініки, що забезпечує найкращий робочий процес. Підвищений тиск промивання у MELAtherm®10 Evolution дозволяє одночасно дезінфікувати значно більше інструментів ніж у MELAtherm®10 при майже однаковому споживанні електроенергії, води та технологічних агентів.

Таким чином, можлива чистка та дезінфекція інструментів для 45 пацієнтів лише за один цикл із рекордною швидкістю!

MELAtherm®10 Evolution доступний у версії змінного струму (230 В) або трифазного струму (400 В).



MELAtherm®10 Evolution DTA

Вбудоване рішення - трифазний струм

Розміри пристрою (ШхВхГ): 60 x 82 x 68 см,

підходить під стільницю 60 см

Електричне підключення: 3N AC 400V, 50 Hz, 3 x 16A

вкл. CF-карта

№ замовлення ME20020

615 670 грн

(з урахуванням базової корзини)

MELAtherm®10 Evolution DTB

Вбудоване рішення - змінний струм

Розміри пристрою (ШхВхГ): 60 x 82 x 68 см,

підходить під стільницю 60 см

Електричне підключення: 230 В, 50 Гц, 16 А

вкл. CF-карта

№ замовлення ME20021

615 670 грн

(з урахуванням базової корзини)



Підлоговий блок

забезпечує додатковий простір для зберігання, гарантує ергономічне завантаження та роботу.

Розміри (ШхВхГ): 60 x 40 x 60 см

№ замовлення ME11021

47 340 грн



Кришка з нержавіючої сталі

у випадку, якщо пристрій не закритий наскрізною поверхнею

№ замовлення ME65310

9 960 грн

Сенсорний дисплей:

Управління та вибір програми такі прості, як ніколи раніше, завдяки великому сенсорному дисплею Smart. Інтегровані відеоінструкції з усіх відповідних питань експлуатації гарантують зрозумілу концепцію експлуатації.



ProControl:

Виконання автентифікації користувача та пакетного затвердження безпосередньо на пристрої економить час і забезпечує юридичну впевненість



AquaBoost:

Новий високопродуктивний насос забезпечує на 44 % кращий результат очищення та більшу продуктивність: дезінфікує до 23 наконечників і турбін за цикл.



Більше засобів для миття та дезінфекції, ніж будь-коли раніше:

Відкрийте для себе унікальну концепцію пристрою MELAtherm®10 Evolution

Відскануйте QR-код і дізнайтеся більше.



Кошики та адаптери для всіх сфер медицини

Досконалість у найменших деталях

Оптимізована для всіх медичних практик камера мийно-дезінфікуючих машин MELAG забезпечує короткий час роботи, ергономіку, низьке споживання технологічних засобів і оптимальні результати очищення. Використовуйте понад 80 різних корзин і адаптерів, щоб налаштувати прилад відповідно до своїх потреб – незалежно від розміру та спеціалізації вашої клініки. Широкий асортимент контейнерів MELAstore® забезпечує найкращі рішення для дезінфекції великої кількості інструментів.

Базова конфігурація для стоматологічної клініки

Інструменти для понад 45 пацієнтів і до 33 порожнистих інструментів

можна дезінфікувати за один цикл за рекордно короткий час:

1x ME84610: Базова корзина з інжекторною рейкою та фільтром Cleanfinity

1x ME80135: Універсальний тримач Flex 2

3x ME01181: Контейнер MELAstore® 100

1x ME80020: Корзина Flex 2

2x ME80110: Тримач для ножиць, затискачів і відбиткових ложок

1x ME00184: Стандартна корзина для приладів Standard

1x ME00133: Корзина для дрібних деталей Small-parts

Як опція: адаптери для інжекторної рейки, корзина інжектора Flex 1 і 6 вставок для насадок скалера



Базова конфігурація для операційних щеплено - лицьової хірургії

Інструменти повторно обробляються як набір у MELA зберігати@мити лотки в рекордні терміни:

1x ME84610: Базова корзина з інжекторною рейкою та фільтром Cleanfinity

1x ME80136: Універсальний тримач Flex 3

6x ME01181: Контейнер MELAstore® 100

1x ME80135: Універсальний тримач Flex 2

3x ME01182: Контейнер MELAstore® 200

1x ME00195: Корзина для інструментів Compact

Як опція: адаптери для інжекторної рейки



Базова конфігурація для ортодонтів

Наступна конфігурація завантаження ідеально підходить для дезінфекції інструментів ортодонтичної клініки:

1x ME84610: Базова корзина з інжекторною рейкою та фільтром Cleanfinity

2x ME80020: Корзина Flex 2

4x ME80110: Тримач для ножиць, затискачів і відбиткових ложок

1x ME00184: Стандартний кошик для приладів

Як опція: адаптери для інжекторної рейки, корзина інжектора Flex 1



Базова конфігурація для офтальмологічної клініки

MELAtherm® з новими контейнерами MELAstore® Ophthalmology дозволяє очищати та дезінфікувати до шести наборів для лікування катаракти лише за 42 хвилини (плюс сушіння):

1x ME80440: Базова корзина з інжекторною рейкою та пластиковим центральним фільтром

2x ME80136: Універсальний тримач Flex 3

6x ME01189: Контейнер MELAstore® Ophthalmology

Як опція: адаптери та заглушки



Базова конфігурація для гінекологічної клініки

Після автоматизованого очищення, дезінфекції та сушіння для лікування пацієнтів доступні до 32 дзеркал. Корзина Flex 6

забезпечує додатковий простір для інших інструментів:

1x ME00188: Базова корзина без інжекторної рампи

1x ME80255: Корзина Flex 6

2x ME80410: Корзина Flex specula



Базова конфігурація для оториноларингологічної клініки

192 вушних дзеркала та багато інших інструментів можна очистити, продезінфікувати та висушити лише за 60 хвилин:

1x ME00200: Базова корзина з інжекторною рейкою (з 11 глухими гвинтами)

1x ME80020: Корзина Flex 2

1x ME80030: Корзина Flex 3

1x ME00195: Корзина для інструментів Compact

1x ME80090: Верхня рамка для вушних дзеркал Flex 2, розмір сітки 20 мм

1x ME80435: Верхня рамка для носових дзеркал Flex 1 (вкл. 2 фіксуючі затискачі)

Як опція: адаптери для інжекторної рейки



Базова конфігурація для медичної клініки

MELAG має низку корзин, шлангових з'єднань і адаптерів для 33 інструментів із порожнистим корпусом. Термодезінфектор відповідає потребам хірургічних, ортопедичних, урологічних, дерматологічних і загальних практик і клінік.

1x ME00200: Базова корзина з інжекторною рейкою (з 11 глухими гвинтами)

1x ME80255: Корзина Flex 6

2x ME80030: Корзина Flex 3

Як опція: адаптери для інжекторної рейки



MEtherm®

Найкращі технологічні засоби для MELAtherm® серії

MEtherm® технологічні засоби оптимально адаптовані до автоматизованої дезінфекції інструментів за допомогою термодезінфекторів MELAG. MEtherm® асортимент складається з слаболужного миючого засобу MEtherm®51, нейтралізатора на основі лимонної кислоти MEtherm®55 і ополіскувача MEtherm®61. MEtherm® технологічні засоби були оптимально узгоджені для досягнення найкращих результатів очищення та сушіння, підвищеної безпеки, ще більшого скорочення споживання та, отже, економії коштів.

MEtherm®51

Тепер ще краще: слаболужний миючий засіб, ємність 5 літрів

MEtherm® 51 з новою формулою - це ще більш потужний м'який лужний миючий засіб для автоматизованої обробки інструментів для автоматизованої обробки інструментів в MELAtherm®. Особливо високі показники очищення досягаються завдяки використанню комбінації ферментів і поверхнево-активних речовин. MEtherm® 51 не містить силікатів, зводить до мінімуму утворення нальоту на інструментах і мийній камері і підтримує їх збереження завдяки оптимальній сумісності з матеріалами.



4 290 грн

№ замовлення ME11630



Ми наполегливо рекомендуємо використовувати MEtherm®51 для нових установок. Для існуючих приладів важливо перейти з MEtherm®50 до MEtherm®51 перед наступним сервісом, щоб повною мірою скористатися перевагами нової формули. MEtherm®50 буде доступний лише на короткий час протягом перехідного періоду.

4 290 грн

№ замовлення ME11620

MEtherm®55 C

Нейтралізатор на основі лимонної кислоти, ємність 5 літрів

MEtherm®55 призначений для автоматизованої дезінфекції інструментів після їх лужного очищення у MEtherm®51. MEtherm®55 запобігає утворенню відкладень на інструментах і камері термодезінфектора, одночасно оптимізуючи результати очищення. MEtherm®55 — нейтралізатор, який надзвичайно безпечний для матеріалів, спеціально розроблений для обробки стоматологічних наконечників та інструментів, що використовуються в офтальмології.



3 240 грн

№ замовлення ME11621

MEtherm®61

Ополіскувач, флакон 940 мл

MEtherm®61 — рідкий ополіскувач з нейтральним рН для автоматизованої дезінфекції інструментів у термодезінфекторі. MEtherm®61 гарантує сушіння інструментів без плям і сприяє оптимізації процедури сушіння. Використання MEtherm®61 запобігає утворенню плівки на інструментах і в мийній камері.



1 060 грн

№ замовлення ME11627

Регенеруюча сіль

Спеціально гранульована та високоочищена регенеруюча сіль для вбудованої системи пом'якшення води MELAtherm® серії.



№ замовлення ME80000

Базові кошики та інжекторні рейки

База для індивідуального навантаження

Базові кошики з інжекторною рейкою оснащені інжекторними форсунками, фіксуючі гвинти або 11 глухих гвинтів та можуть бути оснащені різними адаптерами. Залежно від сфери доступні різні базові кошики (Розміри (ДхШхВ): 43 x 42 x 9 см):

Базова корзина з інжекторною рейкою та фільтром Cleanfinity

з 11 глухими гвинтами з нержавіючої сталі та щіткою для очищення

(не підходить для використання в офтальмології)

№ замовлення ME84610

43 030 грн




Базова корзина з інжекторною рейкою

з 11 інжекторними форсунками і пружинними затискачами

№ замовлення ME00197

32 400 грн

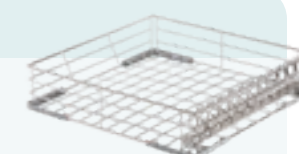


Базова корзина з інжекторною рейкою

з 11 пластиковими глухими гвинтами

№ замовлення ME00200

28 280 грн

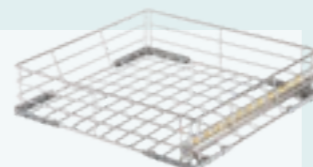


Базова корзина без інжекторної рейки

Якщо вам не потрібно дезінфікувати інструменти з порожнистим корпусом

№ замовлення ME00188

25 060 грн

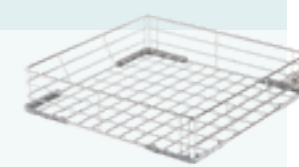

Базова корзина з інжекторною рейкою та одноразовим центральним фільтром (2 шт.)

для офтальмологічних кабінетів і клінік

№ замовлення ME80440

42 770 грн

Комплект оновлення та аксесуари для інжекторної рейки з центральним фільтром

У вас уже є базовий кошик з інжекторною рейкою і ви хочете перейти на очищення з центральним фільтром? Тоді скористайтеся перевагами нашого комплекту оновлення та аксесуарів.

Комплект оновлень інжекторної рейки з фільтром Cleanfinity і щіткою для очищення

для заміни інжекторної рампи без центрального фільтра (не підходить для використання в офтальмології)

№ замовлення ME84620

24 230 грн



Фільтр Cleanfinity з щіткою для чищення

для заміни одноразового центрального фільтра та фільтра Cleanfinity

(не підходить для використання в офтальмології)

№ замовлення ME84630

12 990 грн



Щітка для очищення фільтра Cleanfinity

входить в комплект поставки фільтра Cleanfinity

№ замовлення ME84640

960 грн




Одноразовий центральний фільтр

для заміни використаного фільтра в рейці інжектора

№ замовлення ME80490

6 020 грн

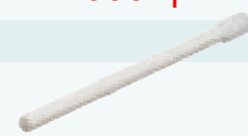

MELAcontrol® Перевірка очищення

Слідкуйте за результатом очищення: за допомогою тестової системи, що складається з індикатора очищення та тримача, ви можете контролювати ефективність очищення інструментів у базовій корзині або на рейці інжектора відповідно до DIN EN ISO 15883-5.

MELAcontrol® Перевірка очищення

Індикатори очищення, 100 шт

№ замовлення ME01072



MELAcontrol® Перевірка очищення

Тримач для перевірки зовнішнього очищення в базовій корзині

№ замовлення ME01073



MELAcontrol® Перевірка очищення

Тримач для перевірки внутрішнього очищення на рейці інжектора





№ замовлення ME01074



Корзини та адаптери

Оптимальне використання базової корзини

Усі компоненти ідеально вирівняні, щоб можна було обладнати основний кошик іншими кошиками або вставними полицями. Адаптуйте шість сегментів основного кошика до ваших індивідуальних потреб:

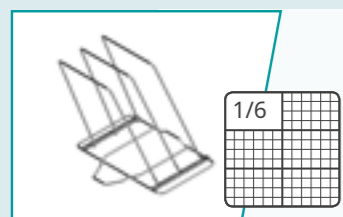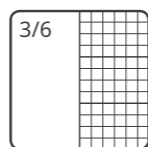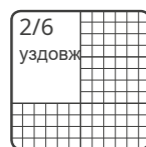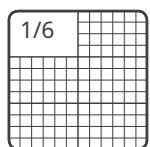

Універсальний тримач Flex 1


Для зручного завантаження з довільно обраною відстанню до:

- 4x контейнер MELAstore® 50,
- 2x контейнер MELAstore® 100,
- 1x контейнер MELAstore® 200 або 1x Сітчаста касета (№ замовлення ME80185)

Додатковий кронштейн (№ замовлення ME80133)

№ замовлення
ME80134

3 930 грн

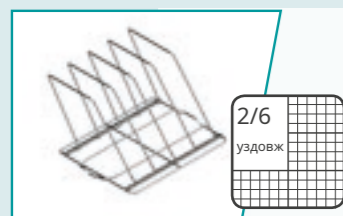

Універсальний тримач Flex 2


Для зручного завантаження з довільно обраною відстанню до:

- 8x контейнер MELAstore® 50,
- 4x контейнер MELAstore® 100,
- 3x контейнер MELAstore® 200 або 3x Сітчаста касета (№ замовлення ME80185)

Додатковий кронштейн (№ замовлення ME80133)

№ замовлення
ME80135

5 300 грн

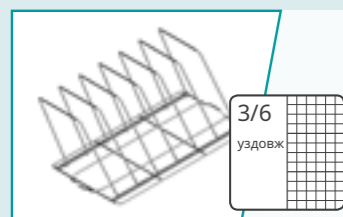

Універсальний тримач Flex 3


Для зручного завантаження з довільно обраною відстанню до:

- 12x контейнер MELAstore® 50,
- 6x контейнер MELAstore® 100,
- 5x контейнер MELAstore® 200 або 5x Сітчаста касета (№ замовлення ME80185)

Додатковий кронштейн (№ замовлення ME80133)

№ замовлення
ME80136

9 380 грн

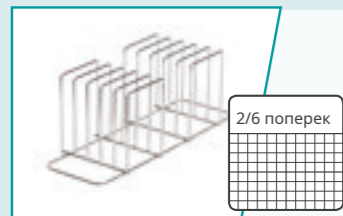

Тримач для 5 контейнерів або 10 половинок

Для прийому до 5 контейнерів або 10 половинок

№ замовлення
ME80590

5 300 грн




Корзина для інструментів G

Для вертикально стоячих інструментів, таких як ножиці, пінцети, затискачі, зонди, дзеркала та насадки стоматологічних відсмоктувачів діаметром від 11 до 16 мм. Можна комбінувати з пластиною для голчастих наконечників (№ замовлення ME00186)

№ замовлення
ME00131

8 870 грн

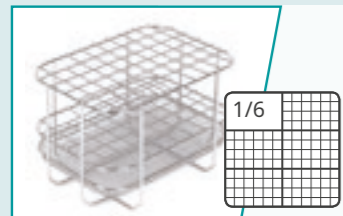


Корзина для інструментів compact

Для вертикально стоячих інструментів, таких як пінцети, зонди, дзеркала, носові дзеркала та насадки стоматологічних відсмоктувачів діаметром від 11 до 16 мм. Можна комбінувати з пластиною для голчастих наконечників (№ замовлення ME00186)

№ замовлення
ME00195

7 850 грн

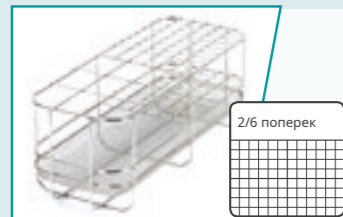

Корзина для приладів standard

Для вертикально стоячих інструментів, таких як пінцети, зонди, дзеркала, ножиці, затискачі та насадки стоматологічних відсмоктувачів діаметром від 11 до 16 мм. Можна комбінувати з пластиною для голчастих наконечників (№ замовлення ME00186)

№ замовлення
ME00184

8 240 грн



Контейнер MELAstore® Ophthalmology

Контейнер для безпечної та дбайливої обробки всіх інструментів для хірургії катаракти (макс. 6 комплектів за цикл MELAtherm®)

Контейнер MELAstore® Ophthalmology упаковують і стерилізують у контейнері MELAstore® 200 (Набір вкл. адаптер і трубки)

Ідеально поєднується з базовою корзиною з інжекторною рейкою та пластиковим центральним фільтром (№ замовлення ME80440) і 2x універсальним тримачем Flex 3 (№ замовлення ME80136)

№ замовлення
ME01189

19 690 грн

НОВИЙ



Контейнер MELAstore® 50

Контейнер MELAstore® 50 (ШхВхД): 11,8 x 3 x 18 см

Для безпечної та ефективної обробки окремих інструментів і наборів інструментів (наприклад, для профілактики або в ортопедії) в MELAtherm®

№ замовлення
ME01180

8 760 грн



Контейнер MELAstore® 100

Контейнер MELAstore® 100 (ШхВхД): 17,6 x 3 x 27,5 см

Для безпечної та ефективної обробки окремих інструментів і наборів інструментів (наприклад, для лікування пародонтиту, консервативного лікування або невеликих хірургічних процедур) у MELAtherm®

№ замовлення
ME01181

11 760 грн



Контейнер MELAstore® 200

Контейнер MELAstore® 200 (ШхВхД): 17,6 x 4,3 x 27,5 см

Для безпечної та ефективної обробки окремих інструментів та наборів інструментів (наприклад, для оральної хірургії) у MELAtherm®

№ замовлення
ME01182

13 460 грн



Захист наконечників для корзини для інструментів

Запобігає проникненню гострих інструментів у корзину

Можна розмістити в корзині для інструментів standart (№ замовлення ME00184), корзина G (№ замовлення ME00131) і корзині для інструментів compact (№ замовлення ME00195)

№ замовлення
ME00186

1 090 грн



Корзина для дрібних інструментів Small-parts comfort


Для безпечної дезінфекції дрібних інструментів і дрібних деталей

Зручну корзину для дрібних інструментів можна розмістити в корзинах Flex

Розміри (ШхВхГ): 8,4 x 7,15 x 7 см

№ замовлення
ME80001

4 020 грн

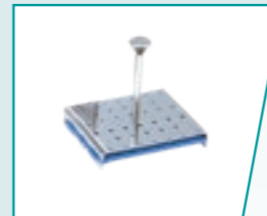

Тримач борів

Для безпечної обробки обертових інструментів (наприклад, борів) з діаметром 1,6 мм і 2,35 мм (до 19 штук кожен)

Тільки в поєднанні з корзиною для дрібних речей Small-parts comfort

№ замовлення
ME80002

1 920 грн



Корзина для дрібних інструментів Small-parts

Для безпечної обробки найменших інструментів

Корзину Small-parts можна розмістити в корзинах Flex або корзинах для інструментів

Розміри: ø 7,6 см x довжина: 18 см


№ замовлення
ME00133

1 050 грн

Корзини Flex

Система корзин Flex надає багато можливостей

Розробка компанії MELAG включає варіативну систему Flex, яка забезпечує численні комбінації завантаження інструментів, що дозволяє оптимально використовувати мийну камеру. Використовуючи корзину Flex 6 як основу, можна в неї вкладати різні корзини Flex 1, 2 і 3, Specula або тримач для відбиткових ложок або навісних інструментів на двох рівнях. На малюнку праворуч показано верхня рамка Flex 2 для вушних дзеркал, вкладена у корзину Flex 3, у поєднанні з корзиною Flex 1 і верхньою рамкою Flex 1 для вушних дзеркал.

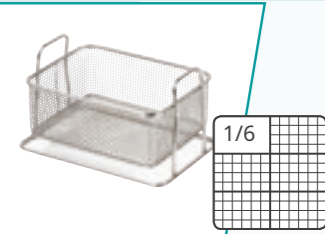


Корзина Flex 1

Для рівних інструментів, наприклад, ножиць, пінцетів, дзеркал
Можна складати в стійку з корзинами Flex 1, 2, 3 і 6
Внутрішні розміри (ШхВхГ): 14,5 x 6 x 11 см

№ замовлення
ME80010

6 740 грн

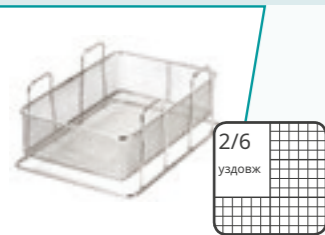


Корзина Flex 2

Для рівних інструментів, наприклад, ножиць, пінцетів, дзеркал, елеваторів
Можна складати в стійку з корзинами Flex 1, 2, 3 і 6
Внутрішні розміри (ШхВхГ): 14,5 x 6 x 24 см

№ замовлення
ME80020

8 040 грн

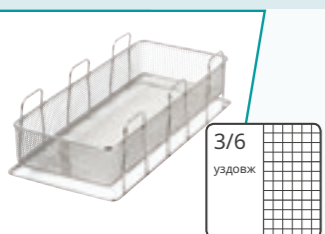


Корзина Flex 3

Для рівних інструментів, наприклад, ножиць, пінцетів, елеваторів
Можна складати в стійку з корзинами Flex 1, 2, 3 і 6
Внутрішні розміри (ШхВхГ): 14,5 x 6 x 37,5 см

№ замовлення
ME80030

8 970 грн

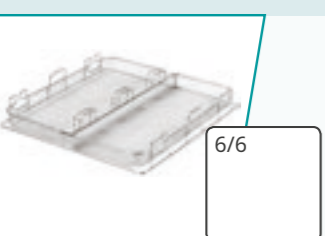


Корзина Flex 6

Для довгих рівних інструментів довжиною до 40 см, наприклад, ножиць, пінцетів, дзеркал
Використовується в якості основи під корзини Flex 1, 2, 3 і корзину Flex specula
Внутрішні розміри (ШхВхГ): 34 x 3 x 38 см

№ замовлення
ME80255

12 930 грн

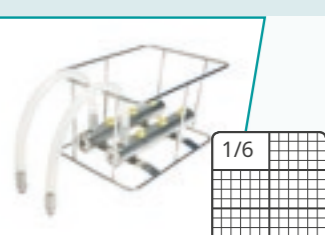


Корзина інжектора Flex 1

До 6 адаптерів (MELAtherm®: лише адаптери для наконечників, MELAtherm® Evolution: усі адаптери)

Потрібен або базовий кошик з інжекторною рейкою та центральним фільтром (№ замовлення ME84610 або ME80440), або два додаткові одинарні корпуси фільтра (№ ME73905) у поєднанні з базовою корзиною інжекторною рейкою (№ ME00197)
У комплект поставки входять необхідні шланги та шлангові з'єднання

№ замовлення
ME80740

13 790 грн

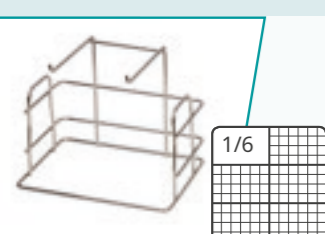

Тримач для відбиткових ложок, ножиць і затискачів

До 8 відбиткових ложок, а також ножиць і затискачів
Ножиці та затискачі необхідно відкрити та повісити на кільця (вічка)
Можна складати в стійку з корзинами Flex 1, 2, 3 і 6

№ замовлення
ME80110

7 020 грн




Корзина Flex specula

Для гінекологічних дзеркал: вміщує до 8 комплектів дзеркал Kristell / 16 дзеркал Cusco / Semm

Можна вкласти у корзину Flex 6

№ замовлення
ME80410

9 960 грн

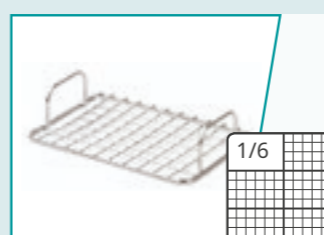


Верхня рамка Flex 1 для вушних дзеркал, розмір сітки 14 мм

До 50 вушних дзеркал

Для вставки у корзини Flex 1, 2 і 3. Також можна використовувати як кришку
Корзини можуть бути частково заповнені цими рамками або повністю (наприклад, 3 верхні рамки на корзині Flex 3)

№ замовлення
ME80070

3 260 грн

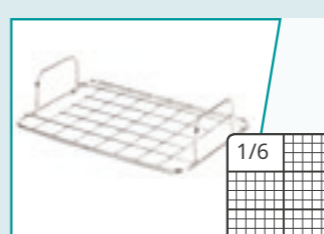


Верхня рамка для вушних дзеркал Flex 1, розмір сітки 20 мм

До 24 вушних дзеркал

Для вставки у корзини Flex 1, 2 і 3. Також можна використовувати як кришку
Корзини можуть бути частково заповнені цими рамками або повністю (наприклад, 2 верхні рамки на корзині Flex 2)

№ замовлення
ME80080

2 810 грн

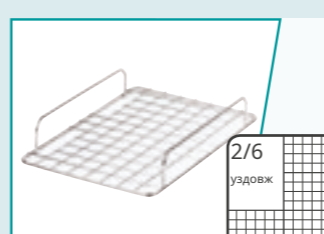


Верхня рамка для вушних дзеркал Flex 2, розмір сітки 20 мм

До 60 вушних дзеркал

Для вставки у корзини Flex 1, 2 і 3. Також можна використовувати як кришку
Корзини можуть бути частково заповнені цими рамками або повністю (наприклад, 1 верхня рама на 2 корзини Flex 1)

№ замовлення
ME80090

4 150 грн

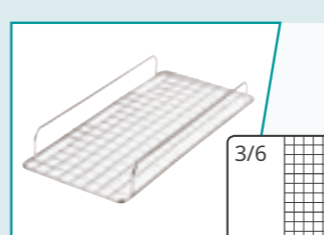


Верхня рамка для вушних дзеркал Flex 3, розмір сітки 20 мм

До 96 вушних дзеркал

Для вставки у корзини Flex 1, 2 і 3. Також можна використовувати як кришку
Корзини можуть бути частково заповнені цими рамками або повністю (наприклад, 1 верхня рама на корзині Flex 3)

№ замовлення
ME80100

5 200 грн

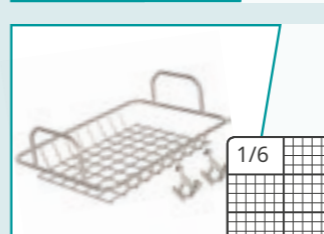

Верхня рамка для носових дзеркал Flex 1 (включаючи 2 фіксуючі затискачі)

Для самофіксуючих інструментів, наприклад, дзеркал носа

Можна використовувати з корзинами Flex 1, 2 і 3

№ замовлення
ME80435

3 990 грн



Фіксатор для верхньої рами

Входить в комплект верхньої рамки для носових дзеркал (№ замовлення ME80435)

Також можна використовувати для всіх верхніх рамок для вушних дзеркал

Для кріплення однієї верхньої рамки потрібно два фіксатори

№ замовлення
ME80420

800 грн



Тримач інструментів для корзин Flex (60 шт.)

Для безпечної фіксації інструментів у корзині

№ замовлення
ME80395

4 500 грн



Універсальний адаптер (включаючи 3 вставки та фільтрувальний диск)

Для обробки трансферів, скалерів, піскоструминних апаратів тощо.

У комплекті 3 силіконові вставки: зелена (Ø 16 мм), синя (Ø 20 мм) і біла (Ø 22 мм)

Можна прикрутити до інжекторної рейки базової корзини

Фільтрувальний диск, що входить до комплекту постачання, потрібен лише для інжекторної рейки без центрального фільтра

№ замовлення
ME73904

6 190 грн



Тримач інструментів для універсального адаптера

Для додаткової фіксації інструментів в універсальному адаптері

У комплекті тримаюче кільце і 3 силіконові ремінці

№ замовлення
ME22968

960 грн

НОВИЙ



Потрійний розподільувач (включаючи керамічний фільтрувальний диск)

Для трьох інжекторних форсунок, адаптерів Luer/Luer-Lock або з'єднувачів для шлангів

Фільтруючий диск, що входить до комплекту, потрібен лише для інжекторної рейки без центрального фільтра

№ замовлення
ME73903

5 490 грн



Потрійний розподільувач (без фільтрувального диска)

Для трьох інжекторних форсунок із пружиною для затискання, адаптерами Luer/Luer-Lock або шланговими з'єднаннями

Для обробки інструментів з порожнистим корпусом, використовується з інжекторною рейкою з центральним фільтром

№ замовлення
ME22611

4 850 грн



Корпус фільтрувального диска (включаючи керамічний фільтрувальний диск)

Перехідники для порожнистих інструментів можна вкрутити в корпус диска, якщо інструменти потрібно промити фільтрованою водою

Використовуйте два окремих корпуси фільтра, щоб підключити корзину інжектора Flex 1 (ME80740) до інжекторної рейки без центрального фільтра

Фільтрувальний диск, що входить до комплекту, потрібен лише для інжекторної рейки без центрального фільтра

№ замовлення
ME73905

3 260 грн



Розпірна трубка

Для максимального використання інжекторної рейки з універсальними адаптерами, потрійними і подвійними розподільувачами та корпусами фільтрувальних дисків

При використанні більш ніж 6 універсальних адаптерів, розподільників або корпусів фільтрувальних дисків потрібна дистанційна трубка для кожного додаткового адаптера на інжекторній рейці

№ замовлення
ME55120

800 грн



Керамічний фільтрувальний диск (10 шт.)

Для використання з універсальним адаптером, потрійним розподільувачем або з корпусом дискового фільтра

Можна використовувати в MELAtherm® макс. 20 циклів

№ замовлення
ME64375

2 710 грн



Металевий фільтрувальний диск

Для використання з універсальним адаптером, потрійним розподільником або з корпусом фільтрувального диска

Після 20 циклів у MELAtherm®, диск необхідно очистити в ультразвуковій ванні

Диск можна очищати до 20 разів в ультразвуковій ванні

Металевий фільтрувальний диск не схвалений для офтальмології

№ замовлення
ME80350

4 650 грн



Трубка для полоскання вкл. подовжувач

Для порожнистих інструментів із діаметром від 2 до 11 мм і нестандартним з'єднанням

Якщо трубка для полоскання вкручена в інжекторну рейку, можна очищати інструменти довжиною до 22 см.

У комплекті є подовжувач трубки для промивання та 5 силіконових вставок різного діаметру

№ замовлення
ME80260

4 150 грн



Адаптер для ISO-з'єднання (INTRA)

Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та центральним фільтром (№ замовлення ME80440 або ME84610) або з базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ замовлення ME00197) і додатковим корпусом фільтруючого диску (№ замовлення ME73905)

№ замовлення
ME80610

2 520 грн



Адаптер для Sirona T1 Classic

Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та центральним фільтром (№ замовлення ME80440 або ME84610) або з базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ замовлення ME00197) і додатковим корпусом фільтруючого диску (№ замовлення ME73905)

№ замовлення
ME80620

3 000 грн



Адаптер для кутових наконечників KaVo / BienAir

Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та центральним фільтром (№ замовлення ME80440 або ME84610) або з базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ замовлення ME00197) і додатковим корпусом фільтруючого диску (№ замовлення ME73905)

№ замовлення
ME80630

2 520 грн



Адаптер для турбін W&H-з'єднання (Roto Quick)

Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та центральним фільтром (№ замовлення ME80440 або ME84610) або з базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ замовлення ME00197) і додатковим корпусом фільтруючого диску (№ замовлення ME73905)

№ замовлення
ME80640

3 000 грн



Адаптер для турбін Sirona-з'єднання

Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та центральним фільтром (№ замовлення ME80440 або ME84610) або з базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ замовлення ME00197) і додатковим корпусом фільтруючого диску (№ замовлення ME73905)

№ замовлення
ME80650

2 520 грн



Адаптер для турбін KaVo-з'єднання (MULTiflex)

Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та центральним фільтром (№ замовлення ME80440 або ME84610) або з базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ замовлення ME00197) і додатковим корпусом фільтруючого диску (№ замовлення ME73905)

№ замовлення
ME80660

2 520 грн



Адаптер для турбін NSK-з'єднання (Phatelus)

Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та центральним фільтром (№ замовлення ME80440 або ME84610) або з базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ замовлення ME00197) і додатковим корпусом фільтруючого диску (№ замовлення ME73905)

№ замовлення
ME80612

3 420 грн

НОВИЙ



Адаптер для зовнішніх каналів розпилення

Для обробки, наприклад, хірургічних турбін із зовнішніми розпилювальними каналами

Для внутрішнього очищення та дезінфекції потрібен універсальний адаптер або додатковий адаптер для наконечників

Адаптер вкручується безпосередньо в інжекторну рейку із центральним фільтром (№ замовлення ME84610 або ME80440) або в корпус фільтрувального диска (№ замовлення ME73905)

№ замовлення
ME74135

1 980 грн



Форсунка інжектора

Для порожнистих інструментів, наприклад хірургічних аспіраційних канюль

Може вкручуватися в інжекторну рейку, подвійний розподільник або потрійний розподільник

Зовнішній діаметр: 4 мм

Додаткова пружина для затискання (№ для замовлення ME00196)

№ замовлення
ME73860

670 грн

Найбезпечніше знезараження наконечників зубного ультразвукового скейлера

Дезінфекція інструментів з порожнистим корпусом, що відповідає стандартам, стає все більш важливою. Корзина інжектора Flex 1 — це найбезпечніше рішення для автоматичної обробки наконечників ультразвукового скейлера. Корзина дозволяє прикріпити 6 наконечників за допомогою динамометричного ключа та вимагає лише двох з'єднань на інжекторній рейці. Використовуйте три корзини інжектора Flex 1 для дезінфекції до 18 наконечників за цикл.



Адаптер для наконечників М3,0 x 0,5 мм, зовнішня різьба



Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та фільтром (№ ME84610 або ME80440), базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ ME00197) і корпусом додаткового фільтрувального диска (№ ME73905) або з корзиною інжектора Flex 1 (№ замовлення ME80740)

№ замовлення
ME80750

1 660 грн

Наприклад для KaVo SONOsoft, Piezo LUX; EMS Piezon / Piezon LED; W&H Piezo Scaler; Tigon, Tigon+, Pyon 2 surgery, Piezomed; Komet PiezoLine EM1, KA1, KA2; NSK Varios EMS; Mectron Multipiezo

Адаптер для наконечників М3,0 x 0,35 мм, зовнішня різьба



Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та фільтром (№ ME84610 або ME80440), базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ ME00197) і корпусом додаткового фільтрувального диска (№ ME73905) або з корзиною інжектора Flex 1 (№ замовлення ME80740)

№ замовлення
ME80752

1 660 грн

наприклад для KaVoPiezoLED, PiezoSoft

Адаптер для наконечників М3,0 x 0,6 мм, зовнішня різьба



Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та фільтром (№ ME84610 або ME80440), базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ ME00197) і корпусом додаткового фільтрувального диска (№ ME73905) або з корзиною інжектора Flex 1 (№ замовлення ME80740)

№ замовлення
ME80756

1 660 грн

Наприклад для Acteon (Satelec) Newtron, Suprasson; Ultradent Newtron; Hu-Friedy Piezo S-Serie; NSK Varios

Адаптер для наконечників М3,5 x 0,35 мм, внутрішня різьба



Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та фільтром (№ ME84610 або ME80440), базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ ME00197) і корпусом додаткового фільтрувального диска (№ ME73905) або з корзиною інжектора Flex 1 (№ замовлення ME80740)

№ замовлення
ME80755

1 660 грн

Наприклад для Planmeca LM-ProPowe

Адаптер для наконечників М3,5 x 0,6 мм, внутрішня різьба



Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та фільтром (№ ME84610 або ME80440), базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ ME00197) і корпусом додаткового фільтрувального диска (№ ME73905) або з корзиною інжектора Flex 1 (№ замовлення ME80740)

№ замовлення
ME80760

1 660 грн

Наприклад для Sirona SIROSON, SIROSONIC, PerioSonic; Komet PiezoLine S11; Dürr Vector Scaler; Morita Softy / Softy LED

Адаптер для наконечників М3,6 x RH1,5 P0,5, внутрішня різьба



Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та фільтром (№ ME84610 або ME80440), базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ ME00197) і корпусом додаткового фільтрувального диска (№ ME73905) або з корзиною інжектора Flex 1 (№ замовлення ME80740)

№ замовлення
ME80751

1 660 грн

Наприклад для KaVo SONICflex quick 2008



Адаптер для наконечників М3,0 x 0,5 мм, внутрішня різьба

Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та фільтром (№ ME84610 або ME80440), базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ ME00197) і корпусом додаткового фільтрувального диска (№ ME73905) або з корзиною інжектора Flex 1 (№ ME80740)

№ замовлення
ME80790

1 660 грн

Наприклад для KaVo SONICflex 2000, 2003; Sirona SIROAIR L; W&H Luftscaler, Proxeo, Synea, Alegria; Komet SonicLine SF1LM; NSK Luftscaler Ti-Max S970, AS2000; EMS Piezon (LED)



Адаптер для наконечників ультразвукового скейлера М3,0 x 0,35 мм, внутрішня різьба

Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та фільтром (№ ME84610 або ME80440), базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ ME00197) і корпусом додаткового фільтрувального диска (№ ME73905) або з корзиною інжектора Flex 1 (№ ME80740)

№ замовлення
ME80753

1 660 грн

Наприклад, для ультразвукового скейлера KaVo PiezoLED, PIEZOsof



Адаптер для наконечників ультразвукового скейлера М3,0 x 0,6 мм, внутрішня різьба

Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та фільтром (№ ME84610 або ME80440), базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ ME00197) і корпусом додаткового фільтрувального диска (№ ME73905) або з корзиною інжектора Flex 1 (№ ME80740)

№ замовлення
ME80757

1 660 грн

Наприклад, для ультразвукового скейлера Acteon (Satelec) Newtron, Suprasson, NSK Varios



Адаптер для наконечників ультразвукового скейлера М3,5 x 0,6 мм, зовнішня різьба

Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та фільтром (№ ME84610 або ME80440), базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ ME00197) і корпусом додаткового фільтрувального диска (№ ME73905) або з корзиною інжектора Flex 1 (№ ME80740)

№ замовлення
ME80771

1 660 грн

Наприклад, для SSirona Siroson, Sirosonic, PerioSonic



Адаптер для EMS AIR-FLOW Prophylaxis Master

Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та фільтром (№ ME84610 або ME80440), базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ ME00197) і корпусом додаткового фільтрувального диска (№ ME73905) або з корзиною інжектора Flex 1 (№ ME80740)

№ замовлення
ME80614

5 140 грн

НОВИЙ

Наприклад, для EMS EL-308 (Prophylaxis Master)



Адаптер для EMS AIR-FLOW Handy 3.0

Можна використовувати в поєднанні з базовою корзиною з інжекторною рейкою та фільтром (№ ME84610 або ME80440), базовою корзиною з інжекторною рейкою (№ ME00197) і корпусом додаткового фільтрувального диска (№ ME73905) або з корзиною інжектора Flex 1 (№ ME80740)

№ замовлення
ME80613

5 140 грн

НОВИЙ

Наприклад, для EMS EL-540 (Handy 3), EL-542 (Handy 3.0 PERIO), EL-545 (Handy 3.0 PLUS)



Маркувальні диски для адаптерів

Кольорове маркування адаптерів дозволяє уникнути встановлення інструментів на невідповідні адаптери, тим самим запобігаючи пошкодженню різьби

№ замовлення
ME80769

1 050 грн

Набір складається з 6 зелених, 6 синіх і 6 жовтих маркувальних дисків



Гвинтова пробка для інжекторної рейки та розподільвача

Для ущільнення непотрібних отворів в інжекторній рейці, у подвійному або потрійному розподільвачах

№ замовлення
ME80140

700 грн



Адаптер (штекер) для Luer

- Для обробки інструментів / порожнистих голок з Luer з'єднанням (гніздо)
- Можна прикріпити до інжекторної рейки, потрійного чи подвійного розподільвача або корпусу фільтрувального диску

№ замовлення
ME73880

1 280 грн



Адаптер (штекер) для Luer-Lock

- Для обробки інструментів / порожнистих голок із Luer-Lock з'єднанням (гніздо)
- Можна прикріпити до інжекторної рейки, потрійного чи подвійного розподільвача або корпусу фільтрувального диску

№ замовлення
ME74130

1 560 грн



Ущільнювач (гніздо) для Luer / Luer-Lock

- Для ущільнення адаптерів Luer (№ замовлення ME73880) або Luer-Lock (№ замовлення ME74130)

№ замовлення
ME80180

1 280 грн



Адаптер (гніздо) для Luer / Luer-Lock

- Для обробки інструментів/порожнистих голок із з'єднанням Luer (штекер) або Luer-Lock (штекер)
- Можна прикріпити до інжекторної рейки, потрійного чи подвійного розподільвача або корпусу фільтрувального диску

№ замовлення
ME67250

1 560 грн



Ущільнювач (штекер) для Luer-Lock

- Для герметизації адаптерів Luer-Lock (№ замовлення ME67250)

№ замовлення
ME80170

1 280 грн



З'єднання шланга із зовнішньою різьбою

- Для шлангів із внутрішнім діаметром 6 мм, наприклад силіконового шланга (№ замовлення ME80190)
- Можна прикріпити до інжекторної рейки, потрійного чи подвійного розподільвача або корпусу фільтрувального диску

№ замовлення
ME80150

1 560 грн



З'єднання шланга з внутрішньою різьбою

- Для шлангів із внутрішнім діаметром 6 мм, наприклад силіконового шланга (№ замовлення ME80190)
- Можна поєднувати з адаптерами для Luer / Luer-Lock, потрійного або подвійного розподільвача

№ замовлення
ME80160

1 560 грн



Подовжувач шланга з підключеннями

- Для підключення мийних систем або перенесення кріплення інструментів на корзини flex
- Довжина шланга 0,5 м із з'єднаннями з внутрішньою або зовнішньою різьбою
- Можна поєднувати з адаптерами для Luer / Luer-Lock, потрійного або подвійного розподільвача

№ замовлення
ME80195

2 170 грн



Силіконовий шланг 10/6 мм

- Дуже гнучкий силіконовий шланг без перегинів для підключення інструментів
- Інструменти також можуть бути вставлені в шланг
- Довжина шланга 2м

№ замовлення
ME80190

1 700 грн

Відеоуроки для MELAtherm®:



Підготовка інструментів:

Дізнайтеся більше про оптимізацію якості результатів і збереження інструментів шляхом належної підготовки їх до автоматизованого очищення та дезінфекції.

Відскануйте QR-код і перегляньте підручник.



Функціонування MELAtherm®:

Ознайомтеся з інтуїтивно зрозумілою концепцією керування для безпечного використання та вибору програм на MELAtherm®

Відскануйте QR-код і перегляньте підручник.



Регулярні перевірки:

Підтримуйте значення MELAtherm® з регулярними перевітками в повсякденному робочому житті.

Відскануйте QR-код і перегляньте підручник.



Обмін технологічних засобів:

MELAtherm забезпечує оптимальні результати повторної обробки. Дізнайтеся, як замінити технологічні агенти, коли це необхідно.

Відскануйте QR-код і перегляньте підручник.

